

2026
夏

TOHO

研究用

一部キャンペーン対象品のキャンペーン期間は ~2026年9月30日迄

※大幅な為替変動などにより、キャンペーンを中止、もしくはキャンペーン価格を改訂させて頂く場合がございます。予めご了承下さい。

TreffLab®

トレフ ディープ ウェルプレート

キャンペーン P10


SBS規格
適合



DIVERSIFIED BIOTECH

細胞・微生物培養用
プレートシール

P11

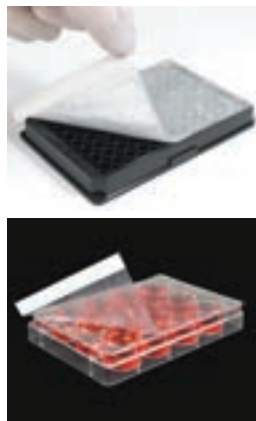

4ward-NA®

ゲノムDNA
ワンステップ抽出キット

P64

NEPTUNE

ネプチューン フィルター チップ

キャンペーン P28

低吸着
S3樹脂



TreffLab®

トレフ PCR チューブ/プレート

P7~9

DNA
低吸着



TreffLab®

トレフ スタンダードキャップ チューブ

P4、P6

DNA
低吸着



EUROL

マウス発情期検出器 MedPro™

P2

デモ機
稼働中



チューブ・プレート・ペトリディッシュ

チューブラック

チップ分注

ラベルシールテープ

保護・洗浄・廃液

機器類

試薬・DNA


マウス発情期検出器 MedPro™




スメアのギムザ染色とMedProでの測定値の比較

- マウスの発情期の確認には、マウスへの負担が大きく時間もかかるギムザ染色が用いられることがありますが、MedProであればストレスを与えることなく容易に発情期のチェックが行えます

MedPro 測定値：12.0（発情期）

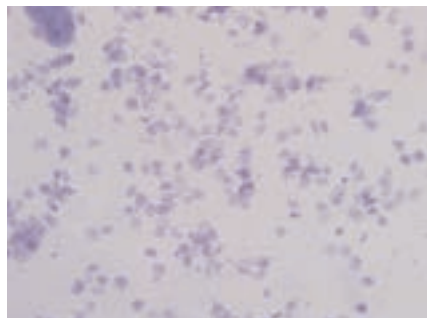

MedPro 測定値：1.5（休止期）

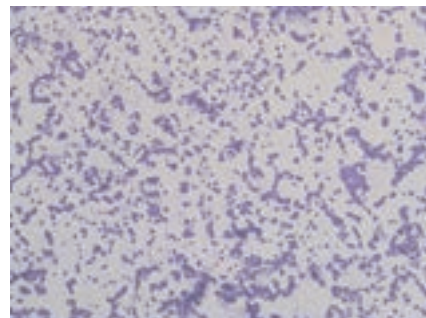

マウス発情期検出器 (MedPro™) は、メスのマウスがいつ繁殖の準備ができたか (発情期と呼ばれる段階) を知るための、シンプルかつ実用的なツールです。ラットでもお使いになれます。

装置の目的

- 雌マウスは生殖周期において様々な段階を経ますが、いつが発情期なのかを知ることにより、繁殖や実験、研究に必要な動物の数を最小限に抑えることができます。
- 顕微鏡で膣の細胞をチェックする一般的な方法に比べ、時間を節約し、またマウスに与えるストレスを低減することができます。

装置の仕組み

- この装置の小さく滑らかなプローブをマウスの膣にそっと挿入します。
- 電気抵抗測定：プローブはマウスに害を与えない程度の微弱な電気信号を発信し、膣内の組織の抵抗値を測定します。この抵抗値により、マウスが生殖周期のどの段階にあるかを判定します。
- 発情期には、他の時期に比べて組織の抵抗値が高くなります。装置が閾値、約6kΩより高い抵抗を測定すると、ユーザーにマウスが発情期であることをお知らせします。

装置のメリット

- 迅速かつ無痛、わずか1秒でマウスを傷つけず、ストレスを与えずに測定します。
- 目視チェックや血液・尿検査といった一般的な方法よりも信頼性が高く、迅速に検知することができます。

注文コード	品名	価格	メーカーコード
1012500	マウス発情期検出器 MedPro	¥375,000	MedPro

商品に関して、
またデモに関してのお問い合わせは…

株式会社トーホー 営業部
☎ 03-3654-6611 ✉ sales@j-toho-kk.co.jp

トレフの品質

"Absolutely PURE Right From The Start"

カタログ上でこのシンボルマークが表示されている商品は「微生物を制御した」「ISO 14644-1 Class 8のクリーンルーム」で製造されています。人手に一切触れないよう、手術室並みの防護体制がとられています。

クリーンルーム ピュア

トレフの基本的な品質と純度の基準を表すロゴマークです



品質の各パラメーター

RNase Free	(<5×10E-9 Kunitz units)
DNase Free	(<5×10E-6 Kunitz units)
DNA Free	(<2pg DNA)
Endotoxins Free	(<0.001 EU/ml)
PCR inhibitors Free	(<10 copies)
ATP Free	(<30 RLU)

ISO/IEC 17025に基づいたリアルタイムPCRにて、分子生物学・微生物学上の分析をスイスの外部機関で行っています。

スイス、トレフ社 (Nolato Treff AG) は、1946年以来熱可塑性素材を使用した高品質の部材の開発・製造に従事しています。産業用、診断用、医療分野の高精度プラスチック部品の製造とは別に、TreffLabのブランド名の下、DNAフリーのラボ向け製品を製造し、独自のネットワークを通じて世界中に供給してきました。

同社はISO 9001、ISO 13485、ISO 22000を認証取得しています。射出成型設備は80以上、敷地は12,500 m²にも及びます。そのうち2,500 m²は微生物を制御したクリーンルームのエリアです。



トップレベルのスイス品質

トレフ社のラボ用消耗品は微生物を制御したISO Class 8のクリーンルームの最新のラインで製造され、世界中で使用されています。

製品の品質の継続的なモニタリングや、外部の専門家によるクリーンルームの監査・再認定により、トップレベルのスイス品質が保証されています。

製品に関する情報 - 証明書やテクニカルデータシートはいつでもご請求ください。




DNA 低吸着 LoTrace DNA™

1.5 ml スタンダードキャップ マイクロチューブ

1.5 ml キャップロックチューブ

リアルタイムPCRによる他社製品との比較

各社1.5 mlチューブを使用してDNA溶液を20℃で2時間インキュベートし、リアルタイムPCRへ。チューブへのDNAの吸着が少ないほど縦軸のCt Mean値が低くなることを示します。(スイス、Biolytix AGにて行われた試験データ)

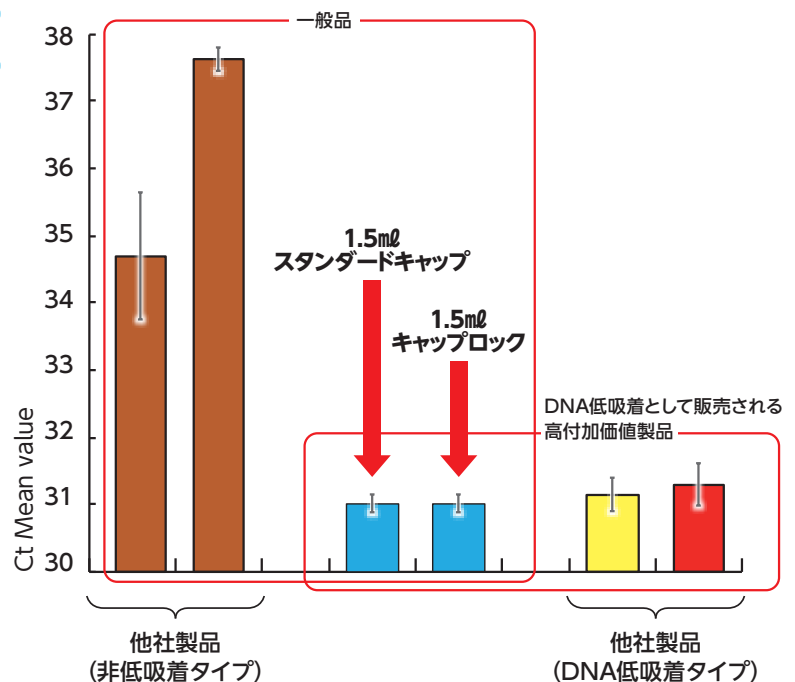

1.5 ml スタンダードキャップ チューブ



CleanRoom[®]
PURE



LoTrace[®]
DNA



イージーフィット
一般的な用途に便利
な開け閉めのしやすい
キャップです

SAMPLE

Ready to Use

注文コード 0300100
メーカーコード 96.07246.9.01
¥3,800 / 1,000本

RNase/DNase Free

Human DNA Free

PCR inhibitors Free

Endotoxins Free

ATP Free

DNA 低吸着

LoTrace DNA™

日頃お使いのチューブがDNA低吸着になります

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP を含まない製品です
- ISO14644-1 Class 8のクリーンルームで製造されています
- パージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されておらず、表面のコーティングなどもありません

最大遠心力：～30,000xg
オートクレーブ可能：121℃、20分
温度範囲：-190℃～121℃



包装がジップ式になりました

0.5 ml スタンダード キャップ チューブ (イージーフィット)



CleanRoom[®]
PURE



LoTrace[®]
DNA



DNA 低吸着

LoTrace DNA™

スイス、トレフブランドのベストセラーチューブを
お求めやすい価格で

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8のクリーンルームで製造されています
- パージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

遠心：～30,000xg
オートクレーブ：121℃、20分
温度範囲：-190℃～121℃

0.5 ml 注文コード 0301000
メーカーコード 96.04625.9.01
500 本入 ¥2,800

SAMPLE

Ready to Use




イージーフィット
一般的な用途に便利
な開け閉めのしやすい
キャップです

トレフチューブ・チップをご購入いただいたお客様を、抽選で東京ドーム巨人戦にご招待しております。ご応募いただきまし
たお客様は2026年度に実施される試合の抽選の対象とさせていただきます。5000本につき1枚、10000本につき3枚の抽選応募
はがきを同封いたします。奮ってご応募ください。お待ちしております。

キャップロック チューブ

キャンペーン

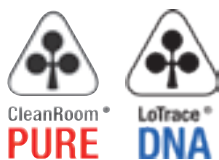

0.5mL



0.5 mL 注文コード 0301500
メーカーコード 96.10833.9.01
500 本入 ¥3,700

キャンペーン価格

¥2,960/@6.0

1.5mL



1.5 mL 注文コード 0300400
メーカーコード 96.08668.9.01
1,000 本入 ¥7,500

キャンペーン価格

¥6,000/@6.0

2.0mL



2.0 mL 注文コード 0301800
メーカーコード 96.10834.9.01
500 本入 ¥4,500

キャンペーン価格

¥3,600/@7.2

1. クリップでしっかりとロックします
2. リップできちんとシールします
3. 曲げやすいヒンジできちんと閉まります



キャップロック
ロックするシステムで、
キャップが開いてしま
うのを防ぎます。

DNA 低吸着

LoTrace DNA™

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8のクリーンルームで製造されています
- パージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

遠心：～30,000xg（2.0mLチューブは～20,000xg）
オートクレーブ：121℃、20分
温度範囲：-190℃～121℃

SAMPLE

Ready to Use

チューブ オープナー（5色セット）



0.2mL～2.0mLチューブに使用でき、
軽く、しかも安全にキャップを開けることができます。

注文コード 0309510

レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー各1本 **¥1,300**



ピペットを持ったまま使えるチューブ キャップ オープナー

チューブ ポッパー



- リングに指を通せばピペットを持ったままキャップが開けられます
使いやすい指を通してご使用下さい
- てこの原理でキャップを開けますので、指で繰り返しキャップを
開けるストレスから解放されます
- ほとんどのマイクロチューブでお使いいただけます

注文コード	品名	価格	メーカーコード
0771650	チューブポッパー	¥5,300	TPOP-1000



ペレット ミキサー



- サンプルの混合等にお使いください
- トレフチューブの形状にあわせてあります
- ポリプロピレン製

SAMPLE
AUTOCLAVE

注文コード	品名	入数	価格	メーカーコード
0310000	ペレットミキサー 1.5mL用	50本	¥14,100	96.07339.9.03
0310010	ペレットミキサー 0.5mL用		¥15,600	96.07338.9.03



1.5 ml スタンダードキャップ チューブ (カラー / 遮光ブラック)



キャップは開け閉めのしやすいイージーフィット
CleanroomPure 品質のカラーチューブです

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- パージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません



DNA 低吸着

LoTrace DNA™

イージーフィット
一般的な用途に便利
な開け閉めのしやすい
キャップです

遠心: ~30,000xg
オートクレーブ: 121℃、20分
温度範囲: -190℃~121℃

SAMPLE Ready to Use

注文コード	品 名	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0300110		ローズ			96.07246.2.01
0300120		イエロー			96.07246.4.01
0300130	1.5 ml スタンダード キャップチューブ	グリーン	1000 本	¥5,800	96.07246.5.01
0300140		ブルー			96.07246.6.01
0300150		遮光ブラック		¥7,400	96.07300.0.01

0.5 ml スタンダードキャップ チューブ (カラー / 遮光ブラック)



キャップは開け閉めのしやすいイージーフィット
CleanroomPure 品質のカラーチューブです

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- パージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません



DNA 低吸着

LoTrace DNA™

イージーフィット
一般的な用途に便利
な開け閉めのしやすい
キャップです

遠心: ~30,000xg
オートクレーブ: 121℃、20分
温度範囲: -190℃~121℃

SAMPLE Ready to Use

注文コード	品 名	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0301010		ローズ			96.04625.2.01
0301020		イエロー			96.04625.4.01
0301030	0.5 ml スタンダード キャップチューブ	グリーン	500 本	¥2,900	96.04625.5.01
0301040		ブルー			96.04625.6.01
0301050		遮光ブラック		¥3,700	96.07456.0.01

トレフ PCR/qPCR チューブ・プレート



- RNase、DNase、Endotoxin、humanDNAfreeです
- オートクレーブにかけられます（121℃、20分）
- ほとんどのサーマルサイクラーに使えます
- 肉厚は薄く均一で、熱の伝わりに優れています
- 高品質のポリプロピレンが使用されています


DNA低吸着



シングルPCRチューブ

SAMPLE

DNA低吸着

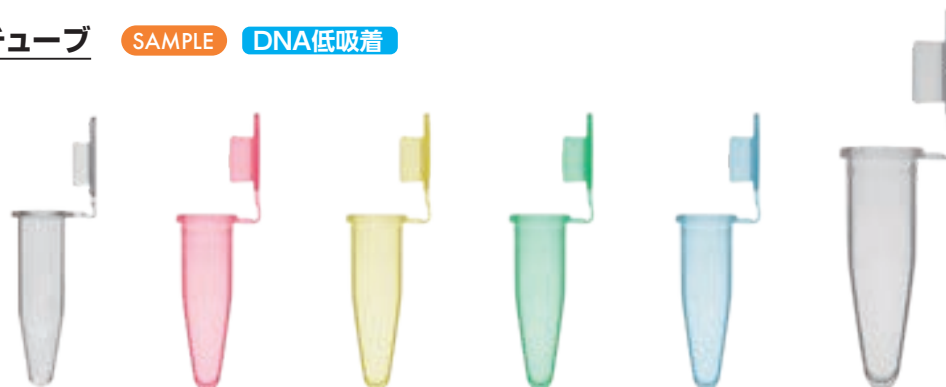

注文コード	容 量	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0302000		クリアー		¥9,200	96.09852.9.01
0302010	0.2ml	ローズ	500 × 2	¥9,600	96.09852.2.01
0302020		イエロー		¥9,600	96.09852.4.01

注文コード	容 量	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0302030		グリーン		¥9,600	96.09852.5.01
0302040	0.2ml	ブルー	500 × 2	¥9,600	96.09852.6.01
0301250	0.5ml	クリアー	500 × 2	¥9,000	96.10385.9.01

8連PCRチューブ／キャップ

SAMPLE

DNA低吸着



フラットキャップ

チューブ 0.2ml 8×125ストリップ

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0302100	クリアー	¥9,500	96.10560.9.01
0302110	ローズ		96.10560.2.01
0302120	イエロー		96.10560.4.01
0302130	グリーン	¥9,800	96.10560.5.01
0302140	ブルー		96.10560.6.01

キャップ 8×125ストリップ

注文コード	キャップ	カラー	価 格	メーカーコード
0302250		クリアー	¥7,700	96.10580.9.01
0302260		ローズ		96.10580.2.01
0302270	ドーム	イエロー	¥7,900	96.10580.4.01
0302280		グリーン		96.10580.5.01
0302290		ブルー		96.10580.6.01
0302200	フラット	クリアー	¥7,900	96.10570.9.01

キャップシーラー



注文コード	価 格	メーカーコード
0435170	¥8,800	1442-5360

8連qPCRチューブ／キャップ

SAMPLE

DNA低吸着




注文コード	チューブ/キャップ	カラー	価 格	メーカーコード
0302500	8 連チューブ 125 ストリップ	ホワイ	¥ 20,500	96.10820.9.01
0302200	8 連フラットキャップ 125 ストリップ	クリアー	¥ 7,900	96.10570.9.01

PCRプレート 96/384ウェル

SAMPLE

DNA低吸着

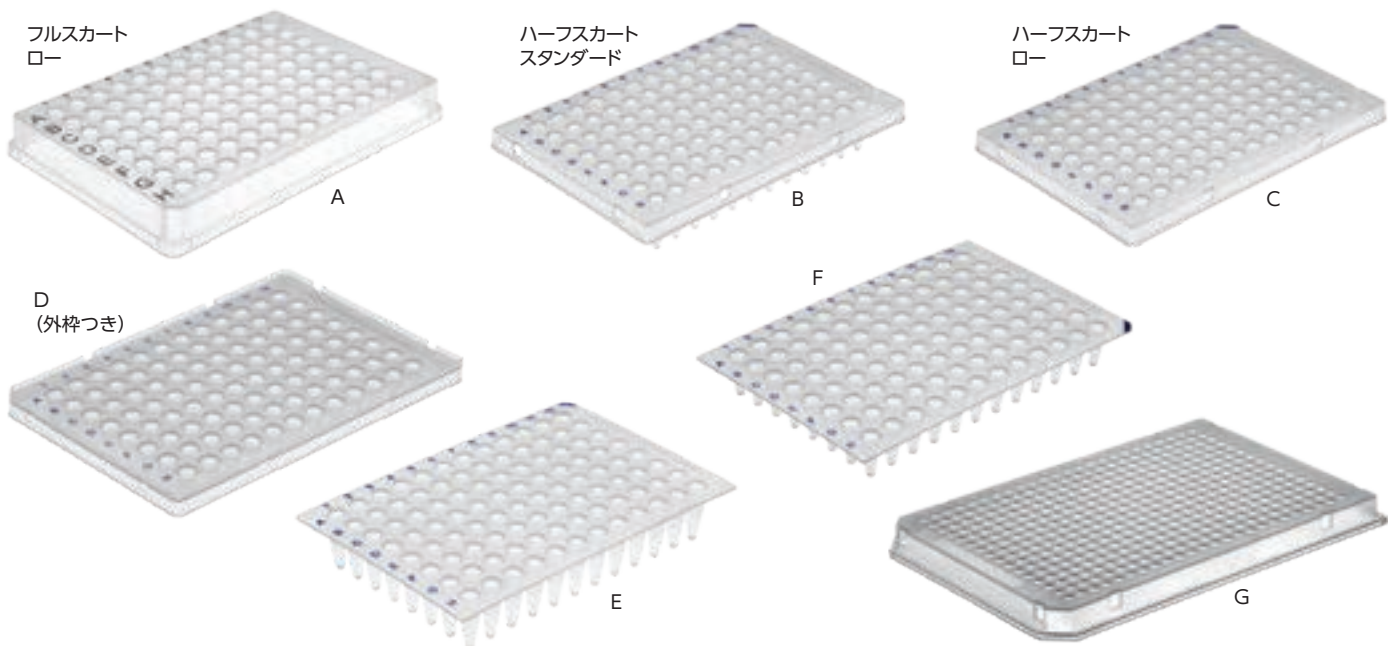


写 真	注文コード	ウェル数	容 量	スカート	プロファイル	材 質	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
A	0302399	96	0.15ml	フル	ロー	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥40,700	96.11203.9.01
B	0302400	96	0.2ml	ハーフ	スタンダード	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥26,700	96.11204.9.01
C	0302401	96	0.15ml	ハーフ	ロー	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥26,700	96.11205.9.01
D	0302402	96	0.15ml	ハーフ	ロー	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥26,700	96.11206.9.01
E	0302403	96	0.2ml	なし	スタンダード	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥26,700	96.11207.9.01
F	0302404	96	0.15ml	なし	ロー	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥26,700	96.11208.9.01
G	0302700	384	40ul	フル		PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥46,300	96.09974.9.01

qPCRプレート 96ウェル

SAMPLE

DNA低吸着

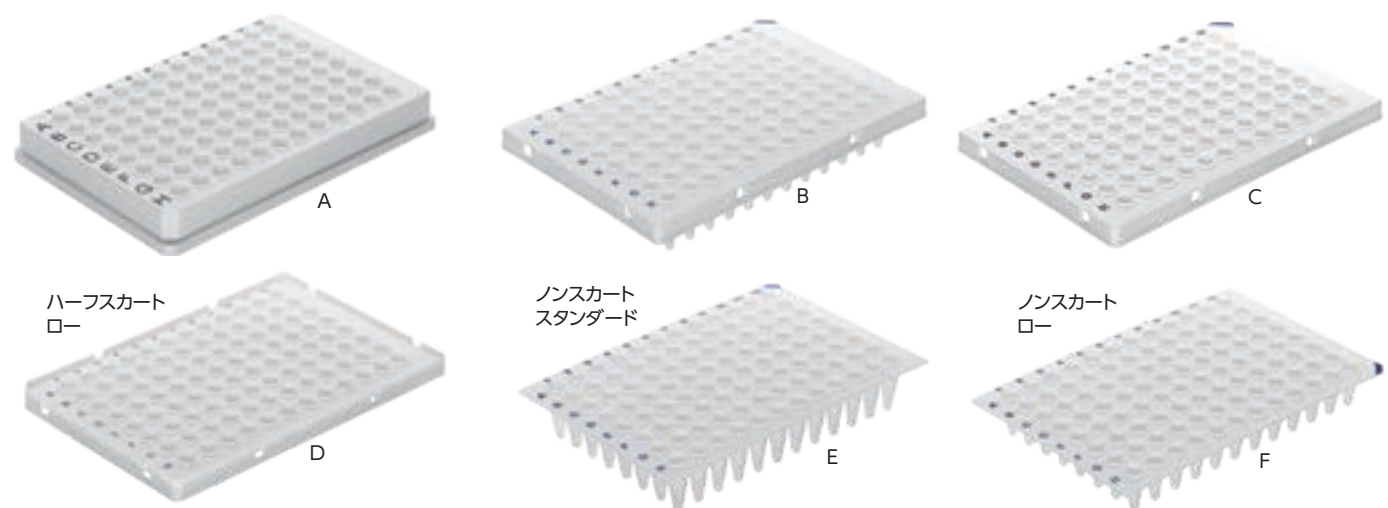

写 真	注文コード	ウェル数	容 量	スカート	プロファイル	材 質	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
A	0302601	96	0.15ml	フル	ロー	PP	ホワイ	50 (10 × 5)	¥41,900	96.11197.9.01
B	0302602	96	0.2ml	ハーフ	スタンダード	PP	ホワイ	50 (10 × 5)	¥27,600	96.11198.9.01
C	0302603	96	0.15ml	ハーフ	ロー	PP	ホワイ	50 (10 × 5)	¥27,600	96.11199.9.01
D	0302604	96	0.15ml	ハーフ	ロー	PP	ホワイ	50 (10 × 5)	¥27,600	96.11200.9.01
E	0302605	96	0.2ml	なし	スタンダード	PP	ホワイ	50 (10 × 5)	¥27,600	96.11201.9.01
F	0302606	96	0.15ml	なし	ロー	PP	ホワイ	50 (10 × 5)	¥27,600	96.11202.9.01


大幅値下げ!!

Roche® LightCycler® 480用 qPCRプレート 96/384ウェル




SAMPLE キャンペーン DNA低吸着

ハーフスカート
ロー

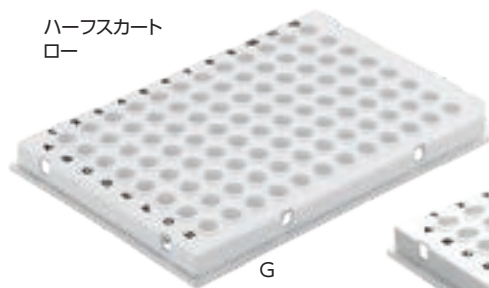


G

ハーフスカート
ロー

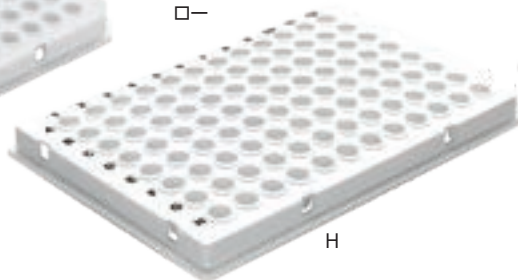

H

フルスカート

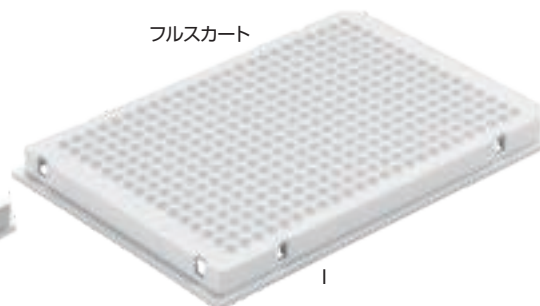

I

写真	注文コード	ウェル数	容量	スカート	プロファイル	材質	カラー	入数	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
G	0302590	96	0.15ml	ハーフ	ロー	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥61,100	→ ¥29,000	96.10867.9.01
H	0302600	96	0.15ml	ハーフ	ロー	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥70,400	→ ¥38,500	96.10868.9.01
I	0302610	384	40ul	フル		PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥54,400	キャンペーン対象外	96.10180.9.01

LightCycler®はRoche社の登録商標です。

シーリング
フویلつき

ショートランでもタイマーでも、2つのモードでスピンドウン

PCRプレート用遠心機 MS-MC

キャンペーン



NEW

【主な特長】

- シンプルで取り扱いも簡単です
- リッドは95°開きますのでプレートの出し入れが簡単です
- スカートの有無を問わず、様々なタイプのPCRプレートに対応します
- ショートランとタイマーでの運転、2つのモードがあります

【主な機能と仕様】

タイマー：～99分／99秒
遠心速度：500～3000rpm
最大遠心力：500×g
ブレーキ：20±5秒
消費電力：45W
サイズ：W220×L245×H200mm
重量：2.5kg

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
1007800	PCRプレート遠心機 MS-MC	¥120,000	→ ¥84,000

トレフ ディープウェルプレート

キャンペーン




- ANSI SLAS 2004 フットプリントに準拠しており、ロボットにも対応しています
図面が必要な場合はご請求下さい
- 気密度、平面度、肉厚は100%自動で管理されています

- RNase, DNase free
- human DNA free
- PCR inhibitors free
- endotoxins free
- ATP free
- バージン樹脂製で、添加剤は一切使用されていません
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません
- ISO 14644-1 クラス 8 のクリーンルームで製造、微生物も厳格に管理されています



2.2mL ポリプロピレン製 (角型ウェル) -80℃～オートクレーブ (121℃ 20分)

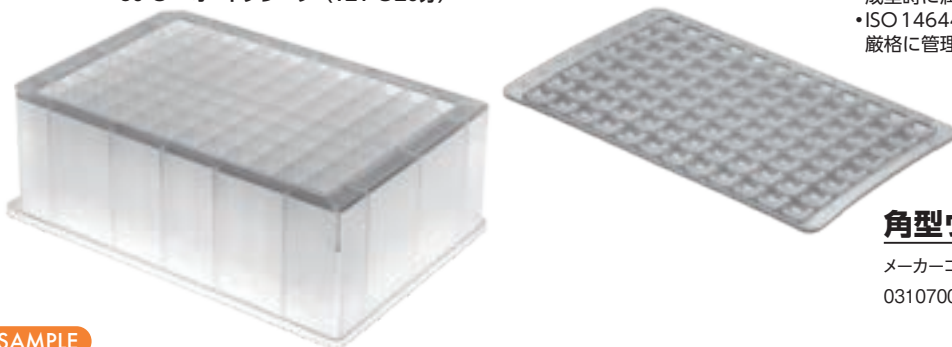


角型ウェル用 カバー (オートクレーブ不可)

メーカーコード 96.09537.9.01
0310700 ￥420 / 1枚

SAMPLE

注文コード	ウェル容量	材質	滅菌	リム	価格	キャンペーン価格	入数	メーカーコード
0310500	2.2mL	PP	未滅菌	—	¥2,500	→ ￥2,000	4枚	96.09799.9.01
0310510		PP	滅菌	—	¥3,200	→ ￥2,560	4枚	96.09971.9.01

1.2mL 透明ポリスチレン製 -20℃～60℃ (オートクレーブ不可)

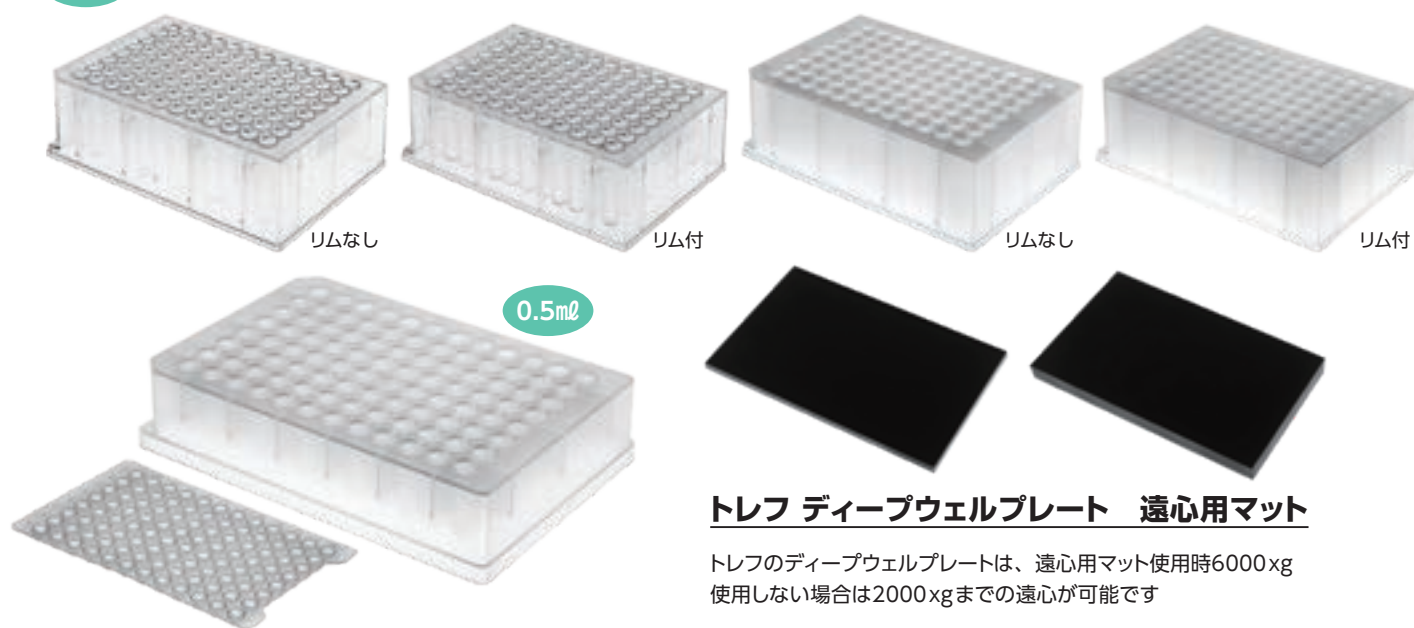

トレフ ディープウェルプレート 遠心用マット

トレフのディープウェルプレートは、遠心用マット使用時6000xg
使用しない場合は2000xgまでの遠心が可能です

丸型ウェル用 カバー (オートクレーブ不可)

メーカーコード 96.09711.9.01
0310250 ￥7,600 / 10枚

注文コード	適応プレート	厚さ	入数	価格	メーカーコード
0310840	2.2 / 1.2mL	4mm	10枚	¥7,600	96.11680.9.02
0310830	0.5mL	8mm	10枚	¥10,900	96.11680.9.01

SAMPLE

注文コード	ウェル容量	材質	滅菌	リム	価格	キャンペーン価格	入数	メーカーコード
0310100	1.2mL	PS	未滅菌	なし	¥2,700	→ ￥1,920	4枚	96.08564.9.01
0310110		PP	未滅菌	なし	¥2,700	→ ￥1,920	4枚	96.08996.9.01
0310170		PS	未滅菌	付	¥2,700	→ ￥1,920	4枚	96.10841.9.01
0310180		PP	未滅菌	付	¥2,700	→ ￥1,920	4枚	96.10842.9.01
0310150		PS	滅菌	なし	¥3,300	→ ￥2,400	4枚	96.08882.9.01
0310160		PP	滅菌	なし	¥3,300	→ ￥2,400	4枚	96.09118.9.01
0310190		PS	滅菌	付	¥3,300	→ ￥2,400	4枚	96.10851.9.01
0310200		PP	滅菌	付	¥3,300	→ ￥2,400	4枚	96.10852.9.01
0310800	0.5mL	PP	未滅菌	付	¥3,600	→ ￥2,880	7枚	96.09851.9.01
0310810		PP	滅菌	付	¥4,600	→ ￥3,680	7枚	96.09965.9.01

※それぞれ8パックで小箱
32パックで大箱となります

通気性のあるメンブレン

ブリーズ イージー / イージーアー

DIVERSIFIED BIOTECH

ブリーズイージー

- 酸素、二酸化炭素、水蒸気の交換を可能にすると同時に、微生物 / ウイルス汚染やウェル間のクロスコンタミネーションを防止します
- 粘着フィルムは正常な細胞増殖を可能にし、細胞ベースの生物学のおよび免疫学的アッセイ、細胞選択、スクリーニング、その他の手順を容易にします

仕様

ガンマ線滅菌済
ポリウレタン製
酸素交換速度：553.5cc/100in²/24h
CO₂交換率：3781cc/100in²/24h
水蒸気交換率：0.7kg/m²/24h


ブリーズイージーアー

- 酸素、炭酸ガス、水蒸気の迅速かつ均一な透過を可能にし、細胞の成長を促します
- 多くの苛性剤および有機溶媒に耐性があります


仕様

ガンマ線滅菌済
不織レイヨン製
酸素交換速度：～4.2kg/m²/24時間
CO₂交換率：～4.2kg/m²/24時間
水蒸気交換率：4.2kg/m²/24時間

プレート用

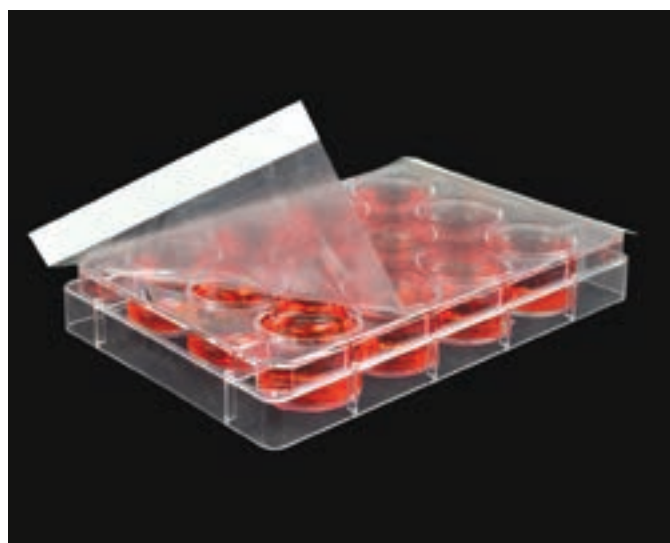

ブリーズイージー

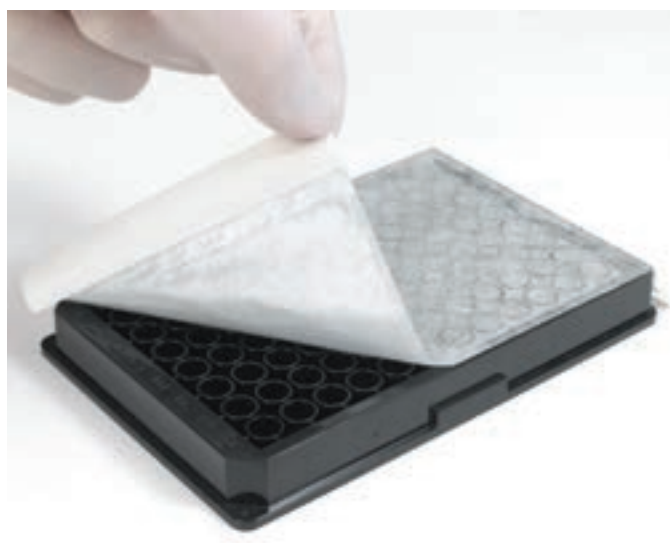

ブリーズイージーアー

ペトリディッシュ用



ブリーズイージー (φ 100mmまでカバー)

マイクロチューブ用



ブリーズイージー



ブリーズイージーアー

注文コード	品 名		サイズ(mm)	入 数	価 格	メーカーコード
0765050	ブリーズイージー	マイクロプレート	82.5 × 152.4	100	¥24,000	BEM-1
0765060	ブリーズイージーアー				¥19,800	BERM-2000
0765085	ブリーズイージー	ベトリディッシュ	16 × 283		¥24,400	BEMP-1000
0765070	ブリーズイージー	マイクロチューブ	φ 約 21mm		¥14,500	BMTM-1000
0765080	ブリーズイージーアー				¥14,500	BMTM-2000

圧力がかかった部分だけ接着

トレフ シーリング フォイル

キャンペーン



- 分析や保管の際に、サンプルをコンタミから守ります
- 接着剤はマイクロカプセルに封じ込められており、圧力がかかった部分以外はサンプルに触れることはありません
- 透明度が高く、リアルタイムPCRに最適です
- 使用温度範囲：-40℃～120℃
- 材質：PET

30% OFF



使用後

使用前



SAMPLE

注文コード	入数	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
0302800	100枚	¥32,400	→ ¥22,600	96.09597.9.01

粘着フィルム

テンプレート シーリング フィルム (ヒートシール)



- 96穴用の粘着フィルムでサンプルのロスを防ぎDNA増幅での温度範囲で使用できます（-40℃～125℃、湿度75%）

SAMPLE

注文コード	滅菌	入数	価格	メーカーコード
0435210	未滅菌	100枚	¥30,500	2921-0000
0435220	滅菌済み		¥41,600	2921-0010



粘着フィルム


NAL-96 シーリング フィルム



- プローブやチップまたサンプルが接着剤に触れることなく取り出せます
- 2層構造のフィルムで、プレート全体をしっかりとシールします
- ウェルの上の90%には接着剤がついていません
- 上の層は簡単につき破れるポリエチレン製で接着剤がついていません
- 下の層はポリプロピレン製でウェルに合わせて穴が開けてあります
- オートサンプラーやロボットに最適で、エアゾールによるコンタミが防げます

SAMPLE

注文コード	滅菌	入数	価格	メーカーコード
0435270	未滅菌	50枚	¥47,500	2923-5000

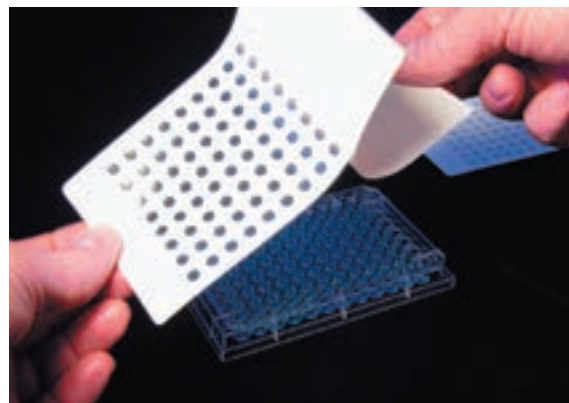


プリカット粘着フィルム

アルミナシール

DIVERSIFIED BIOTECH

- 低温保存、インキュベーション、輸送、遮光が必要なサンプルなどに使えます
- 約70ミクロンのアルミホイルでピペットで突き刺せます
- 滅菌済み
- -80℃～110℃で使用できます
- 耐薬品性がよく、溶剤やジメチルスルホキシド（DMSO）にも耐えます

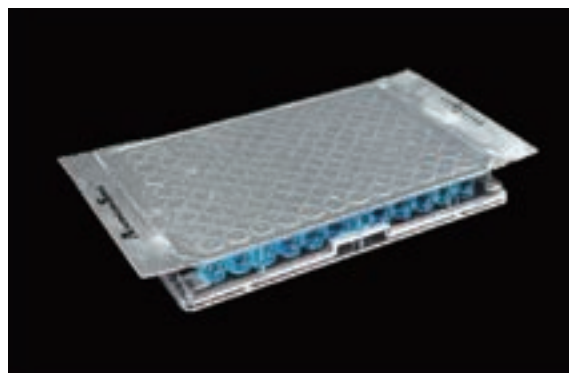

SAMPLE

注文コード	品名	サイズ(mm)	入数	価格	メーカーコード
0764950	アルミナシール	152.4 × 82.5	100 枚	¥23,000	ALUM-1000

粘着フィルム チップで突き刺せます!

タイタートップ (ガンマー線滅菌済み)

DIVERSIFIED BIOTECH

- マイクロプレート用粘着フィルムです
- サンプルの蒸発、こぼれ、コンタミを防ぎます
- 152.4mm × 82.5mm × 0.11mm
- ピペットチップを突き刺してサンプルの回収ができます
- 使用温度範囲：-40℃～80℃（連続でなければ100℃）
- 湿度：100%



SAMPLE

注文コード	入数	価格	メーカーコード
0765200	50 枚	¥11,800	TTOPS-50
0765300	100 枚	¥20,200	TTOPS-100

ソフトラバーローラー

DIVERSIFIED BIOTECH

- ソフトラバー製のローラーでタイタートップやブリーズイージーメンブレンあるいは他のマイクロプレートシーリングフィルムに最適です
- シーリングメンブレンを均一に貼りつけることができます
- メンブレンの上を転がすだけで各ウェルをきっちりシールできウェル間のコンタミや漏れを防ぐことができます
- ローラーは約101mm幅です




注文コード	価格	メーカーコード
0765350	¥7,300	BRAY-4000

ディスポ スプレッター



- 表面が滑らかで培地を傷つけません
- ABS樹脂製で滅菌済みです
- デルタ型（ガンマ線滅菌）：172×37×14 mm
- L字型（EOG滅菌）：146×38 mm / 4 mmφ

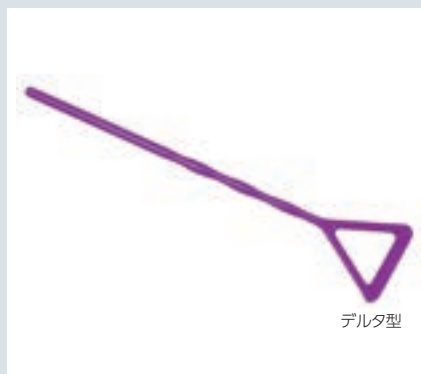

注文コード	品名	包装	入数	価格	メーカーコード
0672050	デルタ型ディスポスプレッター	個別	500	¥27,500	HS8151
0672000	L字型ディスポスプレッター	10本	500	¥24,900	HS8171B

イノキュレーション ループ・ループホルダー・ループホルダーラック



ループ

- 材質はステンレスとプラチナイリジウム
- ループの径は1、2、3、5 mmの4種類

注文コード	ループ径	材質	価格	メーカーコード
0936201	1 mm	ステンレス	¥19,100 / 10本	3.686.112
0936202	2 mm			3.686.122
0936203	3 mm			3.686.132
0936205	5 mm			3.686.152
0936251	1 mm	プラチナイリジウム	¥19,900 / 1本	3.686.212
0936252	2 mm			3.686.222
0936253	3 mm			3.686.232
0936255	5 mm			3.686.252



ループホルダー

- ホルダーの長さは160 mmと240 mm

注文コード	長さ	価格	メーカーコード
0936300	160 mm	¥6,900	3.686.362
0936301	240 mm	¥7,700	3.686.442

ラック

- ラックはPV製で6本立て

注文コード	形状	サイズ	価格	メーカーコード
0936320	丸型	φ 80 × 50 mm	¥24,300	3.687.082
0936321	角型	180 × 50 × 50 mm	¥28,200	3.687.182




イノキュレーティング ループ/ニードル ディスポーザブル



- 滅菌済みのプラスチック白金耳でディスポーザブルです
- 使い捨てですから白金耳の不十分な滅菌によるクロスコンタミが防げます
- 一袋25本入りで、袋は一度開けても再び閉じられるファスナー付きですから残ったループの滅菌状態が長く保てます

注文コード	品名	カラー	バック	入数	価格	メーカーコード
0610010	ループ 1 ul	ブルー	25本	1,000	¥19,000	L200-1
0610020	ループ 10 ul	イエロー				L200-2
0610030	ニードル	ホワイト				L200-3

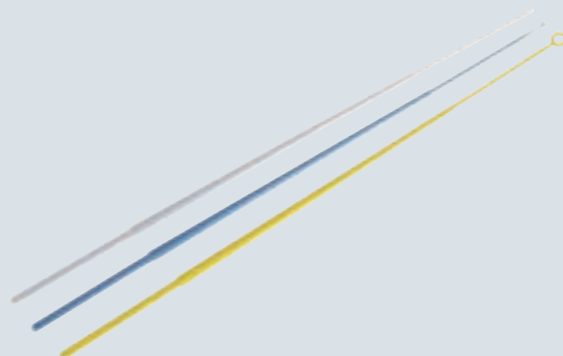

クローニング シリンダー

hilgenberg

- コロニー同志が混じらないように分離させるガラスシリンダーです
- 化学的に不活性なボロシリケートガラス製です
- 両端が研磨されています
- サイズは4種類あります

注文コード	外径(mm)	内径(mm)	高さ(mm)	価 格	メーカーコード
0516000	6	4	8	¥17,700	1980004
0516010	8	6	8	¥39,300	1980003
0516020	10	8	8	¥46,300	1980005
0516030	10	8	10	¥43,600	1740174



ペトリシール

DIVERSIFIED BIOTECH

シーリングテープ
-40℃~70℃

- シャーレ、マイクロプレート用のシーリングテープです
- 耐水性があり、ほとんどの溶媒やアルカリに耐えます
- 使用温度範囲：-40℃~70℃（連続でなければ100℃まで）

注文コード	カラー	テープ幅	長 さ	価 格	メーカーコード
0761800	クリアー				PSEAL-108C
0761810	ホワイト				PSEAL-108W
0761820	レッド	12.7 mm	32.4 m	¥10,200	PSEAL-108R
0761830	イエロー				PSEAL-108Y
0761840	ブルー				PSEAL-108B





ペトリ ステッカー

DIVERSIFIED BIOTECH


- ペトリディッシュの底に貼りつけるステッカーです
- 4℃~42℃の範囲でははがれません
- ステッカーは直径76.2mm

No	注文コード	分 画	入 数	価 格	メーカーコード
①	0765150	正方形 32 分画	36 枚	¥7,200	PSTK-1000
②	0765120	正方形 50 分画			PSTK-1050
③	0765130	正方形 70 分画			PSTK-1070
④	0765140	正方形 100 分画			PSTK-1100
⑤	0765160	60°、6 分画			PSTK-2000
⑥	0765170	45°、8 分画			PSTK-2010
⑦	0765180	30°、12 分画			PSTK-2020
⑧	0765190	22.5°、16 分画			PSTK-2030

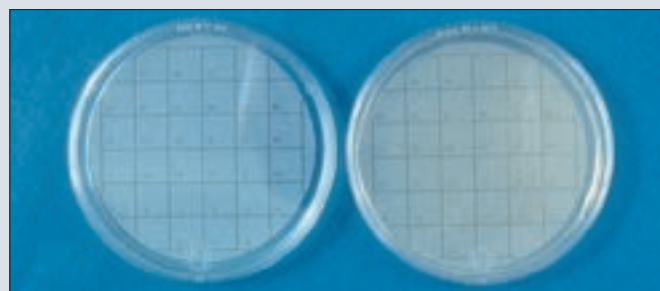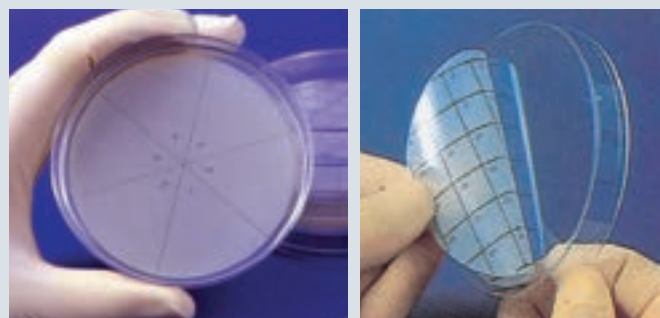

寒天培地を入れる前

寒天培地を入れた後

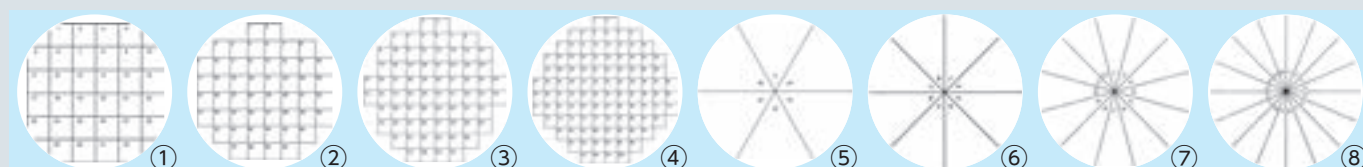

クライオバイアル

- 凍結保存用 ●ガンマ線滅菌済み ●DNase-free ●RNase-free ●Pyrogen-free
- DNA-free ●目盛り、書き込み用マーキングエリア付き ●-196℃（気相のみ）で保存が可能です
- 丸底のみ～17,000xgまで遠心可能です

T309 シリーズ


① リップシール **アウターキャップ**



アウターキャップ

注文コード	容量(mL)	底の形状	サイズ(mm)	入数	価格	メーカーコード
0600110	1.2	自立型	12.5 × 43	100 本	¥5,300	T309-1A
0600000	2	丸底	12.5 × 48	100 本	¥5,300	T309-2
0600010	2	自立型	12.5 × 49	100 本	¥5,300	T309-2A
0600210	3	自立型	12.5 × 72	100 本	¥5,800	T309-3A
0600310	4	自立型	12.5 × 78	100 本	¥6,200	T309-4A
0600410	5	自立型	12.5 × 92	100 本	¥6,800	T309-5A

SAMPLE

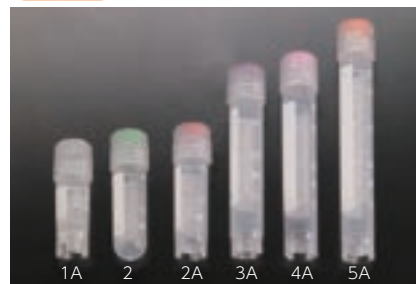

T310 シリーズ


① シリコンワッシャー **アウターキャップ**



アウターキャップ

注文コード	容量(mL)	底の形状	サイズ(mm)	入数	価格	メーカーコード
0600130	1.2	自立型	12.5 × 43	100 本	¥6,400	T310-1A
0600020	2	丸底	12.5 × 48	100 本	¥6,400	T310-2
0600030	2	自立型	12.5 × 49	100 本	¥6,400	T310-2A
0600230	3	自立型	12.5 × 72	100 本	¥7,000	T310-3A
0600330	4	自立型	12.5 × 78	100 本	¥7,700	T310-4A
0600430	5	自立型	12.5 × 92	100 本	¥8,300	T310-5A
0600510	10	自立型	17 × 84	50 本	¥4,900	T310-10A

SAMPLE

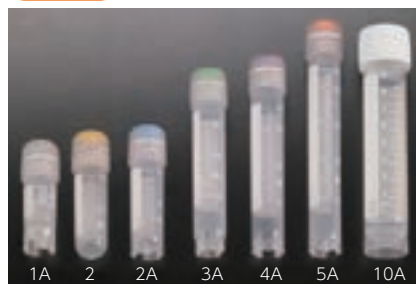

T308 シリーズ


① ロング リップシール + ② シリコンワッシャー **アウターキャップ**



アウターキャップ

注文コード	容量(mL)	底の形状	サイズ(mm)	入数	価格	メーカーコード
0600170	1.2	自立型	12.5 × 42	100 本	¥8,900	T308-1A
0600060	2	丸底	12.5 × 47	100 本	¥8,900	T308-2
0600070	2	自立型	12.5 × 49	100 本	¥8,900	T308-2A
0600270	3	自立型	12.5 × 71	100 本	¥9,500	T308-3A
0600370	4	自立型	12.5 × 77	100 本	¥10,400	T308-4A
0600470	5	自立型	12.5 × 91	100 本	¥11,500	T308-5A

SAMPLE

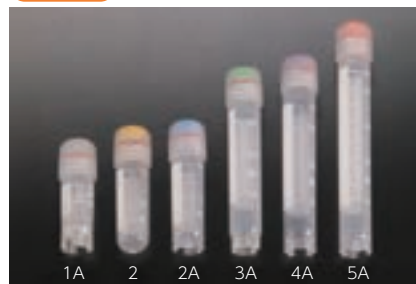

T311 シリーズ


① シリコンワッシャー **インナーキャップ**



インナーキャップ

注文コード	容量(mL)	底の形状	サイズ(mm)	入数	価格	メーカーコード
0600140	1.2	自立型	12.5 × 43	100 本	¥6,500	T311-1
0600040	2	自立型	12.5 × 49	100 本	¥6,500	T311-2
0600050	2	丸底	12.5 × 48	100 本	¥6,500	T311-3
0600340	4	丸底	12.5 × 72	100 本	¥7,800	T311-4
0600350	4	自立型	12.5 × 72	100 本	¥7,800	T311-4A
0600440	5	丸底	12.5 × 92	100 本	¥8,300	T311-5

SAMPLE

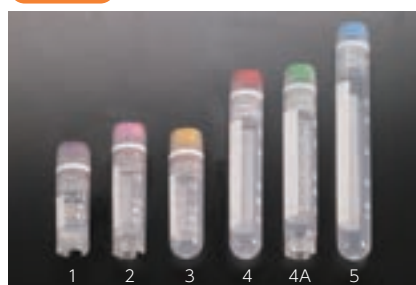

カラーインサート


- クライオバイアル、サンプルチューブのキャップに押し込んでチューブを色で識別します
- ホワイト、ブルー、レッド、グリーン、イエローの5色



SAMPLE AUTOCLAVE

注文コード	カラー	入数	価格	メーカーコード
0602000	ホワイト	100 個	¥730	T312-1
0602010	ブルー			T312-2
0602020	レッド			T312-3
0602030	グリーン			T312-4
0602040	イエロー			T312-5
0602050	5色セット	20 × 5色		T312-7

1.2 ml ディルーション チューブ

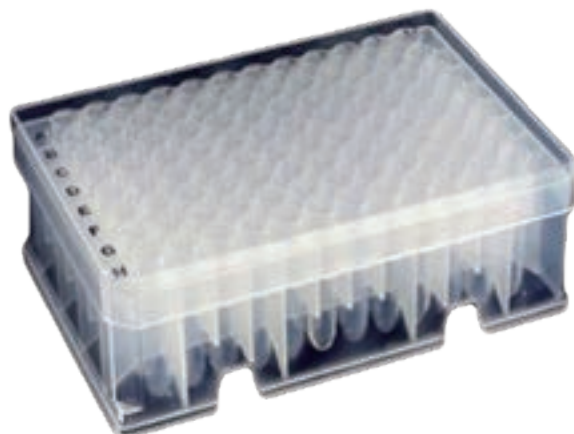

- 希釈系列の作製や液体の混合、サンプルの保存に便利です
- チューブ1本に1.2ml（キャップ使用時は1.0ml）までの液体を入れることができます
- はっきりと印字されたアルファベットと数字で、ウェルの特定が容易です
- ラック入りはマルチチャンネルピペットに対応しており、リッド付き、オートメーションにも対応しています
- RNase, DNase, DNA, PCR inhibitors フリーです
- 滅菌済みの製品はPyrogen フリーです

注文コード	タイプ	滅菌	入数	価格	メーカーコード
0439010	シングル バルク	×	1000	¥12,700	1412-1000
0439020	シングル ラック入	×	96 × 10	¥17,600	1412-1400
0439030	シングル ラック入	○	96 × 10	¥22,200	1412-1410
0439040	8 連チューブ バルク	×	8 × 125	¥12,700	1412-8000
0439050	8 連チューブ ラック入	×	96 × 10	¥18,200	1412-8400
0439060	8 連チューブ ラック入	○	96 × 10	¥22,200	1412-8410
0439110	8 連キャップ バルク	×	8 × 125	¥6,600	1494-0400
0439120	8 連キャップ バルク	○	8 × 125	¥8,000	1494-0410

【仕様】

カラー：ナチュラル
材質：ポリプロピレン
リッド：取り外し式
容量：1.2 ml

滅菌済みカルチャーチューブ

カルチャーチューブ

- ポリスチレン製とポリプロピレン製があります
- ポリスチレン製は最高70℃、遠心は1400xgまで
- ポリプロピレン製は-190℃～120℃、遠心は3000xgまで
- 2ポジション（通気性ありと密封）キャップつきです
- キャップはポリエチレン製でオートクレーブ不可
- パイロジェンフリー、エンドトキシンフリー



注文コード	容量 (ml)	サイズ (mm)	材質	入数	合計	価格	メーカーコード
0604000	4 ml	12 × 75	ポリスチレン	25 本 / 袋	500 本	¥32,300	T415-2
0604050			ポリプロピレン			¥46,800	T415-2A
0604100	12 ml	17 × 100	ポリスチレン	25 本 / 袋	500 本	¥44,000	T416-2
0604150			ポリプロピレン			¥53,000	T416-2A

低温対応 PCR ラック




- リッドをスライドして開け、180℃回転させるとラックスタンドになります
- 持ち運ぶ際に握る部分は滑り止めになっており、ラックを落としてしまうのを防ぐほか、ハンドリングの際の不慮の事故を防ぎます
- リッドの両脇にはスペースがあり、素早く冷却できるよう配慮しています
- 透明なリッドはポリカーボネイト製、取り外しも可能です
- ベースはABS樹脂製、アルファベットと番号でウェルの特が容易です
- 0.2mLチューブ96本用、8連/12連ストリップチューブ対応
- 入数：5色 各1ラック

注文コード：0657100

価格：¥12,100

メーカーコード：120538

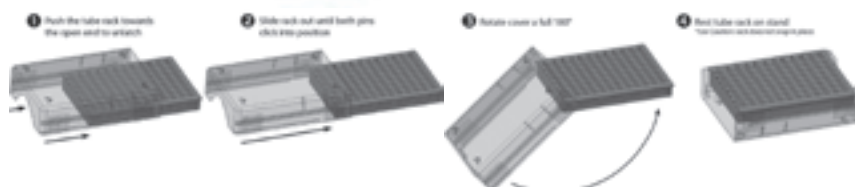

PCR クーラー


PCRの前処理に…氷を使わず、カラーの変化で温度上昇をお知らせします

- フリーザーで素早く冷却し、ベンチトップで低温を保ちます
- 96ウェル全体を、1時間以上0℃に保ちます
- 5℃以下のサンプルの温度を3時間まで保ちます（リッドをかぶせない状態）
- 温度が6℃を超えると、色の変化でお知らせします
- リッドは回転させるとスタンドになります


① ピンク(常温)




パープル(低温)

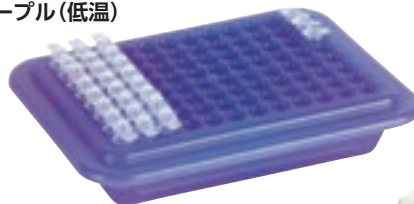

② ライトブルー(常温)

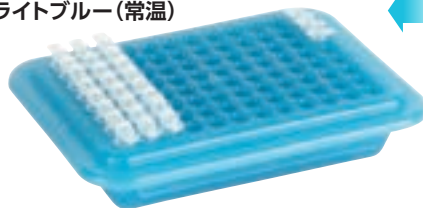

ダークブルー(低温)

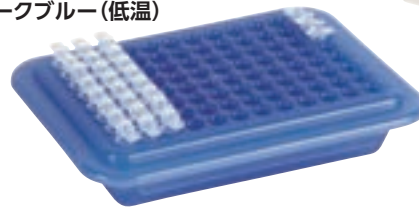

リッドつき



注文コード	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0657000 ① ピンク（常温） ↔ パープル（低温）		1	¥13,700	120727
0657010 ② ライトブルー（常温） ↔ ダークブルー（低温）			¥13,700	120728

アークティクルス PCR 温度で色が変わる


- 0.2mL PCRチューブ、プレートの冷却用で、ラックの温度が上昇するとグリーンからイエローに色が変わります

使用方法：

ラックを-20℃に冷やしてからチューブをたてます

ラックの温度は4℃まで少しづつ上昇していき、3時間は4℃を保ちます

注文コード	仕 様	価 格	メーカーコード
0422300	カバーつき、2個入り	¥33,000	2312-2796

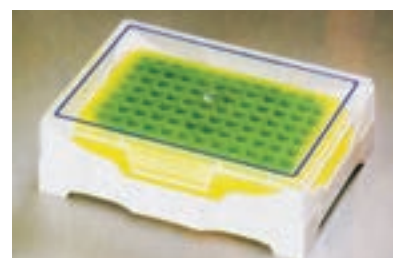

32ウェル PCRラック



-80°C

- 0.2 mLチューブ32本立てのラックです。シングル、8連に加えて、8×4フォーマットのPCRプレートを受納することができます
- 積み重ねが可能です
- 1パッチのサンプル数が少ない時にも便利です
- ヒンジ付きリッドは180°開き、取り外しも可能です
- リッドは透明で、中の確認が容易です
- 入数：1



注文コード：0656000
価格：¥1,500
メーカーコード：120889

PCRラック (ポリプロピレン製)



- 8×12のマイクロタイターフォーマットの0.2 mLチューブ用ラックです
- 透明なカバー付で作業用、フリーズ用として使用できます
- ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエローの5色組です

-90°C

AUTOCLAVE

注文コード	チューブ本数	入数	価格	メーカーコード
0435300	0.2 mL × 96本	5個	¥13,900	2300-9602



96ウェル PCRラック



- 0.2 mL PCRチューブ用の丈夫なラックです
- 8連、12連チューブも立てられます
- ウェルはアルファベットと数字で特定できます
- カバーは取りはずしもできるヒンジ付きです

AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0320010	ブルー		HS23461C
0320020	グリーン	¥1,900	HS23461D
0320110	ナチュラル		HS23461H

ロタラック デュオ



- ラックを回すことにより異なる容量のチューブを一つのラックに並べて希釈や濃縮ができます
 - 組み合わせ (4通り)
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 0.2 mL (96本) と 0.5 mL (48本) | 0.2 mL (96本) と 1.5 mL (48本) |
| 0.5 mL (48本) と 1.5 mL (48本) | 1.5 mL (48本) と 1.5 mL (48本) |

AUTOCLAVE

注文コード	チューブ本数	カラー	サイズ	価格	メーカーコード
0661060	0.2 mL 96本 0.5 mL 48本 1.5 mL 48本	ブルーと パープル	296 × 118 × 34	¥8,500	HS29041A



ベストラック

- 裏表2面が使い、片面は1.5/2.0mL用で反対の面は0.5mL用です
- 両面ともに、ベストラックは96本（8×12）立てられます
- サンプルの保存に便利のようにポリプロピレン製のカバーがついています
- オートクレーブでの滅菌ができ（15分まで）、低温保存（-90℃まで）にも使えます



-90℃

ベストラック（96本立て）

AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0420500	ナチュラル	¥4,000 / 1 個	2396-5000
0420510	ブルー		2396-5001
0420520	グリーン		2396-5002
0420530	オレンジ		2396-5003
0420540	レッド		2396-5004
0420550	バイオレット		2396-5005
0420560	イエロー		2396-5006

96ウェル リバーシブル ラック

Heathrow Scientific

- 片面に0.5mLチューブ、反対の面に1.5/2.0mLチューブがそれぞれ96本（8×12）立てられます
- カバーはスナップで固定できます
- 0.5mL用の面にはグリッドが入っておりウェルが見やすくなっています

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0320210	ブルー	¥3,400	HS2345C
0320220	グリーン		HS2345D
0320230	ピンク		HS2345E
0320240	イエロー		HS2345F
0320310	ナチュラル		HS2345H

AUTOCLAVE



フラクション コレクター ラック

USA SCIENTIFIC

- 1.5mLチューブ80本立てです
- ポリプロピレン製
- カラーは6色揃っています

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0420900	ナチュラル	¥1,300 / 1 個	2380-1000
0420910	ブルー	¥1,400 / 1 個	2380-1001
0420920	グリーン		2380-1002
0420930	オレンジ		2380-1003
0420940	レッド		2380-1004
0420960	イエロー		2380-1006

AUTOCLAVE

-90℃



80ウェル マイクロチューブ ラック

Heathrow Scientific

- 1.5/2.0mLチューブ80本立てラックです

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0320400	ナチュラル	¥1,200 / 1 個	HS29025A
0320410	ブルー		HS29025B
0320420	グリーン		HS29025C
0320430	ピンク		HS29025D
0320440	イエロー		HS29025E
0320450	オレンジ		HS29025F

AUTOCLAVE



チューブキューブ 8種のチューブをひとつのラックで



- キューブの4面には異なった径の穴が開けてあり次のようなサイズの試験管がたてられます
 - 50 mL コニカルチューブ
 - 15 mL コニカルチューブ
 - φ12×75mm カルチャーチューブ
 - φ13×100mm カルチャーチューブ
 - φ16×125mm カルチャーチューブ
 - φ17×100mm カルチャーチューブ
 - 1.5 mL、2.0 mL マイクロテストチューブ
- ポリプロピレン製でオートクレーブにかけられ、4つのキューブとトレーから成るユニークなラックです
- フリーザー、クリーンベンチ、ウォーターバスの中でも使用できます

AUTOCLAVE

写真番号	注文コード	仕 様	価 格	メーカーコード	備考
①	0422000	キューブ(4個)	¥12,600	2344-1000	
②	0422010	+ トレー		2344-1040	蛍光色

キューブラック



- この丈夫なキューブラックは研究室の必需品です
- 4つの面にはそれぞれ以下のチューブが立てられます
 - 50 mLチューブ 4本
 - 15 mLチューブ 10本
 - 12×75/100mmチューブ ... 12本
 - 1.5/2.0 mLチューブ 16本
- ポリプロピレン製でどの向きにも連結して使えます



AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0661100	5色セット	¥15,700 / 5個	HS29050A

*5色セットはブルー、グリーン、ピンク、イエロー、オレンジ各1個

ロタラック チューブラック



- 4つのラックが連結されていて、それぞれが独立して回転しますからいろいろなサイズのチューブを立てることができます
- オートクレーブ可



AUTOCLAVE

注文コード	品 名	立てられるチューブ	サイズ(mm)	価 格	メーカーコード
0661050	ロタラック ラージ	50 mLチューブ / 2本 15 mLチューブ / 8本 φ 20 mmチューブ / 6本 10 ~ 13 mmチューブ / 10本	224 × 110 × 110	¥11,800	HS29040A
0661055	ロタラック スモール	15 mLチューブ / 6本 1.5 / 2.0 mLチューブ / 9本 0.5 / 0.6 mLチューブ / 12本 0.2 mLチューブ / 32本 0.2 mL 8 連チューブ / 4本	210 × 100 × 100	¥11,100	HS29040B



ザ クールセーフ システム 氷を使わずに低温キープ

コンパクトで場所を取らず、サンプルを確実に低温に保ちます。
クールブリック（保冷剤）とクーリングチェンバー（ラック）は交換できます。
1℃用はフリーザー、-10℃用はディープフリーザーで、ともにオーバーナイトで凍らせておきます。

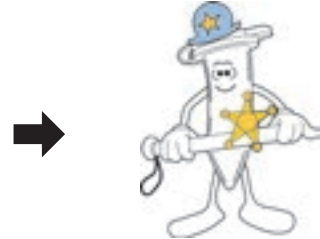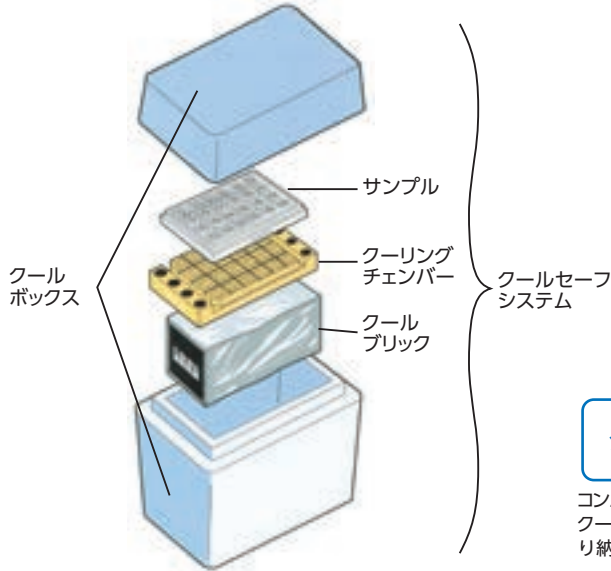

クールボックス

クールブリック

クーリング
チェンバー

コンパクトで、クールブリックとクーリングチェンバーがぴったり納まります。

1℃用はフリーザーで、-10℃用はディープフリーザーで、ともにオーバーナイトで凍らせておきます。



下記①～⑧のブロックがいつでも交換できます。
フレキシブルなシステムです。

クールブリック



在庫限り

クーリング チェンバー

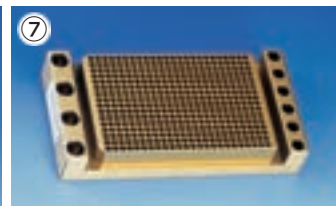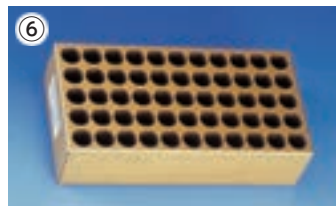

クールボックス・クールブリック

写真	注文コード	品名	価格	メーカーコード
	0767400	クールボックス	¥12,900	CSF-BOX
A	0767200	クールブリック-10℃	¥11,400	BRIK-1520
B	0767300	クールブリック1℃	¥8,700	BRIK-2501
C	0767310	クールブリック1℃	¥9,100	BRIK-1501
D	0767410	クールバッグ	¥5,300	CBAG-1000


クーリング チェンバー

写真	注文コード	価格	メーカーコード
①	0767100	¥61,400	CHAM-1000
②	0767110	¥57,500	CHAM-2000
③	0767120	¥50,000	CHAM-3000
④	0767130	¥61,400	CHAM-4000
⑤	0767140	¥57,500	CHAM-5000
⑥	0767150	¥52,900	CHAM-3050
⑦	0767160	¥95,100	CHAM-3840
⑧	0767180	¥54,300	CHAM-9600

クーリング チェンバー

DIVERSIFIED BIOTECH

- アイスバケツやアイスパンでご使用になれます（22ページのクールセーフシステムにはお使いになれません）
- ご用途に合わせて、豊富なラインナップがそろっています

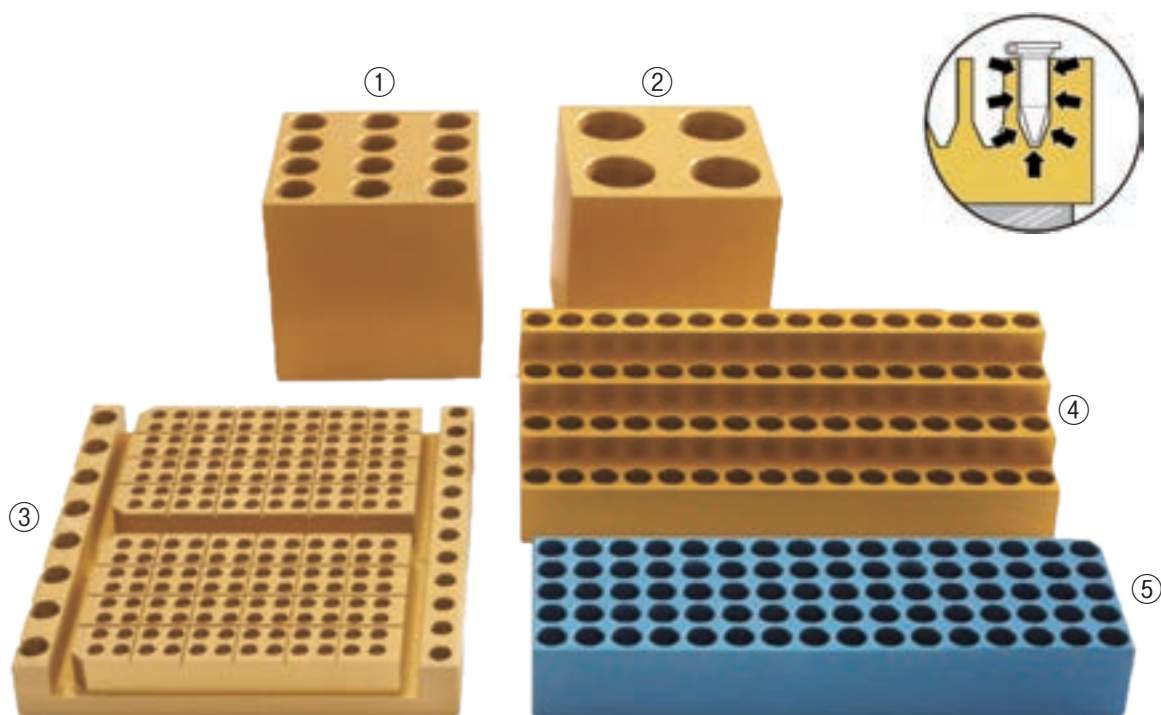

写真番号	注文コード	品名	仕様	価格	注文コード
①	0767470	15mlチューブチェンバー 12本用	15ml × 12	¥54,300	CHAM-6050
②	0767510	50mlチューブチェンバー 4本用	50ml × 4	¥54,300	CHAM-7050
③	0767190	ダブルチェンバー	0.2ml × 96 × 2、0.5ml × 12、1.5ml × 8	¥116,000	CHAM-1020
④	0767480	ステップチェンバー	1.5 / 2.0ml × 64	¥90,000	CHAM-6400
⑤	0767170	80ウェルチェンバー	1.5 / 2.0ml × 80	¥48,000	CHAM-8000

ミニクーラー

Heathrow Scientific

氷を使わずに、サンプルや試薬を低温でキープ

- 本体はポリカーボネイト製、底面には滑り止めがついています
- リッドには座標が入っています

在庫限り

注文コード	容量・本数	カラー	保持時間	価格	メーカーコード
0657030	0.5-2.0mL × 12本	グリーン	1℃ / 3h	¥35,000	120070
0657040	0.5-2.0mL × 32本		1℃ / 2h	¥59,800	120071
0657060	0.5-2.0mL × 32本	ブルー	-15℃ / 1h	¥59,800	120074


※後継品へ近日リニューアル予定です



アイスパン 高密度 (3倍) EPS 製

DIVERSIFIED BIOTECH

- 軽くて丈夫、断熱効果が優れたアイスパンです
- 氷、液体窒素、ドライアイス、アルコールが使用できます
- 塩、酸、アルカリを含んだ液体に対しても耐性があります
- 各サイズグリーンとピンクは在庫限りです

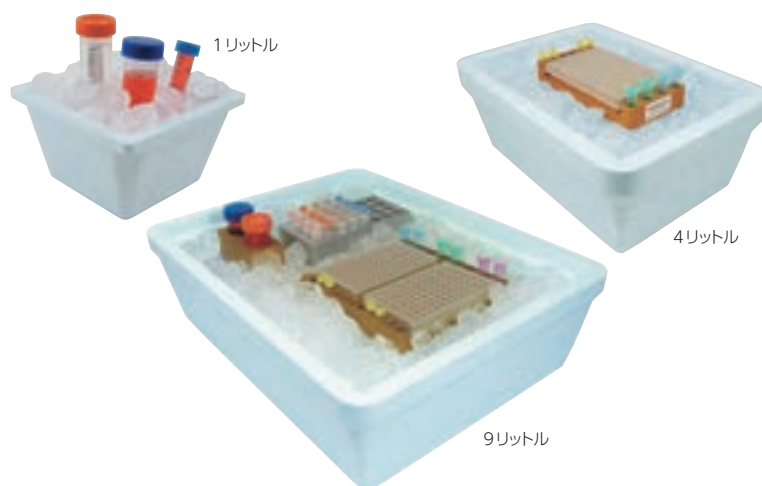

注文コード	容 量	カラー	価 格	メーカーコード
0767830	1 リットル	ブルー	¥7,600	IPAN-1000
0767840	4 リットル	ブルー	¥18,200	IPAN-2000
0767850	9 リットル	ブルー	¥30,600	IPAN-3000

注意：写真のアイスパンの中に入っている、チューブ、クーリングチェンバー等は価格に含まれておりません。

ニューアイス 氷の代用品

DIVERSIFIED BIOTECH

- ポリエチレンフィルムでできた袋に20mlの純水が入っており、冷凍機で凍らせることにより氷の代わりになります
- 袋は丈夫で、洗って再使用することができます
- 暖かい液体を急いで冷やしたい場合などにこのニューアイスを使えば氷と違って液が薄まることはありません
- サンプルを冷たく保つのに最適です
- 周りが濡れたりすることがありません

注文コード	入 数	価 格	メーカーコード
0767900	約 50 個	¥5,500	NEW-100



サーマル マイクロ ビーズ / マイクロビーズ バッグ

DIVERSIFIED BIOTECH

- 熱伝導の高いガラスビーズです
- 試験管、マイクロチューブ、ビーカー、フラスコなど、サイズを問わず使えることができます
- アルミよりも化学的に安定しており、クリーニングも簡単です
- オートクレーブ可、溶剤耐性もあります
- XL サイズは静電気が帯電しにくく、また容器のスカートに挟まるのを防ぐことができます

- ナイロンメッシュでできたバッグで、引きひもで絞めることができます
- 保管、クリーニング、使用時、また持ち運びに便利です
- マイクロビーズを入れてフリーザーに入れておけば、取り出しやすくにお使いになれます

注文コード	品 名	容 量	価 格	メーカーコード
0767540	サーマルマイクロビーズ	1 ℓ	¥16,000	BEAD-2000
0767541	サーマルマイクロビーズXL	1 ℓ	¥16,000	BEAD-2100
注文コード	品 名	容 量	価 格	メーカーコード
0767545	マイクロビーズ バッグ	5 ℓ	¥3,900	BEAD-BAG

在庫限り



サーマル マイクロ ビーズ



マイクロビーズ バッグ

商品にアイスパケットは含まれておりません

サーマルマイクロビーズ
チューブのサイズや形状を問わず
お使いいただけます

アイスパン 4リットル
⇒ P24 上

ニューアイス
氷の代用品

クールブリック (保冷剤)
⇒ P22 を下に置くこともできます

組み合わせ使用例

サーマルマイクロビーズ
チューブのサイズや形状を問わず
お使いいただけます

ドライバインキュベーター
EL-01 ⇒ P53

トレフ トランスファーパーペッテ 容量デジタル可変式



- 右利きでも左利きでも片手で容量をセットできます
- カラーコードにより正しいチップの選択が楽です
- そのままオートクレーブにかけられます（121℃、20分）
- キャリブレーションを簡単に行うことができます

マルチチャンネル ピペット

- ノーズコーンにはO-リングがついており、軽い力でしっかりとチップを装着します
- 左右どちらにも360°回転できます

8チャンネル(デジタル可変式) ￥168,000

注文コード	容量 (ul)	1目盛り (ul)	精度 ± %	再現性 ± %	使用チップ	メーカーコード
① 0311401	0.5 ~ 10	0.1	1.6	1.0	0.1 ~ 20	96.10688.00.1
① 0311431	5 ~ 50	0.1	0.8	0.4	~ 200	96.10688.06.1
⑤ 0311440	10 ~ 100	0.2	0.8	0.3	~ 200	96.10688.08.1
① 0311451	20 ~ 200	0.2	0.8	0.3	~ 200	96.10688.09.1
① 0311461	30 ~ 300	0.2	0.8	0.3	~ 300	96.10688.10.1

備考：ピペットセットにはピペット、チップボックス、壁掛けスタンド、スペアシーリング、リザーバー、シリコンオイル、ブラシ、ツールが標準でついています。

12チャンネル(デジタル可変式) ￥197,000

注文コード	容量 (ul)	1目盛り (ul)	精度 ± %	再現性 ± %	使用チップ	メーカーコード
⑤ 0311500	0.5 ~ 10	0.1	1.6	1.0	0.1 ~ 20	96.10689.20.1
⑤ 0311540	10 ~ 100	0.2	0.8	0.3	~ 200	96.10689.28.1
① 0311551	20 ~ 200	0.2	0.8	0.3	~ 200	96.10689.29.1
⑤ 0311560	30 ~ 300	0.2	0.6	0.3	~ 300	96.10689.30.1

備考：ピペットセットにはピペット、チップボックス、壁掛けスタンド、スペアシーリング、リザーバー、シリコンオイル、ブラシ、ツールが標準でついています。

シングルピペット

- スリムなシャフトで、チップイジェクターがついたまま細い容器の中に入ります
- チップコーンは理想的な標準設計で、トレフチップはもとより他社のチップにもお使いになれます

注文コード	容量 (ul)	1目盛り (ul)	精度 ± %	再現性 ± %	使用チップ	価 格	メーカーコード
① 0311311	0.5 ~ 10	0.01	1	0.5	0.5 ~ 20		96.10687.02.0
⑤ 0311320	2 ~ 20	0.02	0.8	0.4	~ 200		96.10687.03.0
① 0311331	10 ~ 100	0.1	0.6	0.2	~ 200	¥ 45,200	96.10687.74.0
① 0311341	20 ~ 200	0.2	0.6	0.2	~ 200		96.10687.78.0
① 0311351	100 ~ 1000	1	0.6	0.2	~ 1000		96.10687.80.0
① 0311361	500 ~ 5000	5	0.6	0.2	~ 5000	¥ 52,800	96.10687.82.0

注文コードの前のマーク

- ①：トランスファーパーペッテ T（新 型）
- ⑤：トランスファーパーペッテ S（従来型）

トランスファーパーペッテ S はロック機構により誤って容量を変えてしまうのを防いでいます。トランスファーパーペッテ T ではロック機構自体をなくし、ロックのかけ忘れや解除のし忘れを防ぎつつ、誤って容量を変えてしまうのを防ぐようダイヤルの重さを調整しています。

各サイズの S シリーズが完売し次第、順次 T シリーズに切り替わります



トランスファーパーペッテ T
8チャンネル



トランスファーパーペッテ T
12チャンネル



トランスファーパーペッテ T
シングル



トランスファーパーペッテ S

トレフチップ° Slim Line



RNase/DNase Free

Human DNA Free

PCR inhibitors Free


Endotoxins Free

ATP Free


- 非常に純度の高いパーজনポリプロピレンを正確に成型しています
 - 壁面が薄いためよりピペットにフィットし、イジェクションに必要な力を低減、また透明感を増しています
 - 表面はなめらかで疎水性、サンプルの吸着を防ぎ、正確さと再現性を高めています
 - クリーンルーム内の最新の設備で製造され、ラックにもパッケージにも自動で詰められています
 - 色素にカドミウムは一切含まれておりません
- RNase/DNase/ HumanDNA/PCRinhibitors/Endotoxins/ATPを含まない製品です
- ISO 14644-1 Class 8のクリーンルームで製造されています




0.1 ~ 20 µl

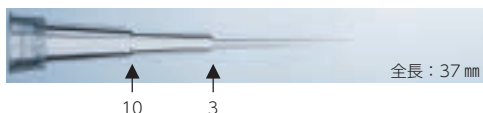


0.5 ~ 20 µl

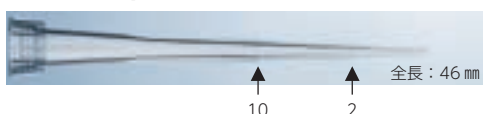


1 ~ 50 µl

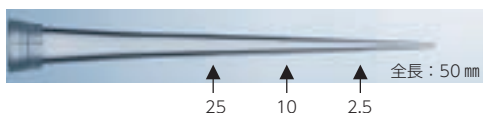


2 ~ 200 µl (ラック入はクリアーです)

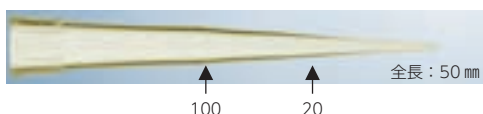

5 ~ 300 µl

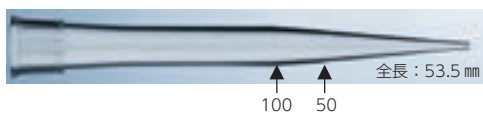

50 ~ 1000 µl (ラック入はクリアーです)

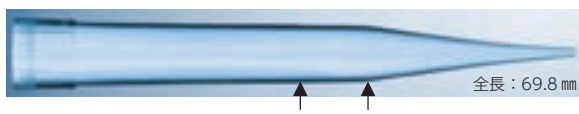

備考：目盛りの単位は µl

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0306001	バルク	クリアー	1,000 本	¥4,800	96.11176.9.01
0306011	ラック入	クリアー	96 × 5 ラック	¥9,800	96.11182.9.01
0306031	リフィル	クリアー	96 × 10 ラック	¥14,100	96.11233.9.01

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0306002	バルク	クリアー	1,000 本	¥3,200	96.11177.9.01
0306012	ラック入	クリアー	96 × 5 ラック	¥7,800	96.11183.9.01
0306032	リフィル	クリアー	96 × 10 ラック	¥9,400	96.11234.9.01



注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0306003	バルク	クリアー	1,000 本	¥2,800	96.11178.9.01
0306013	ラック入	クリアー	96 × 5 ラック	¥7,000	96.11184.9.01
0306033	リフィル	クリアー	96 × 10 ラック	¥9,400	96.11235.9.01

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0306004	バルク	イエロー	1,000 本	¥2,600	96.11179.4.01
0306014	ラック入	クリアー	96 × 5 ラック	¥7,100	96.11185.9.01
0306034	リフィル	クリアー	96 × 10 ラック	¥8,800	96.11236.9.01

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0306005	バルク	クリアー	1,000 本	¥2,700	96.11180.9.01
0306015	ラック入	クリアー	96 × 5 ラック	¥7,100	96.11186.9.01
0306035	リフィル	クリアー	96 × 10 ラック	¥8,800	96.11237.9.01

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0306006	バルク	ブルー	1,000 本	¥3,000	96.11181.6.01
0306016	ラック入	クリアー	96 × 5 ラック	¥7,600	96.11187.9.01
0306036	リフィル	クリアー	96 × 10 ラック	¥9,000	96.11238.9.01

トレフ 5ml / 10ml チップ°

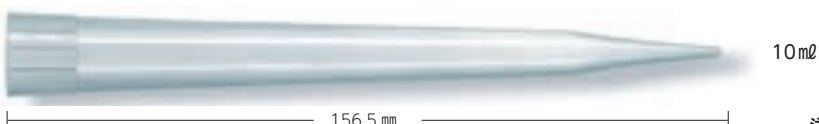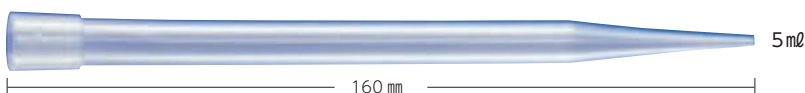

注文コード	品 名	入 数	価 格	メーカーコード
0303500	5ml チップ	200 本	¥6,500	96.08755.9.01
0303550	10ml チップ	200 本	¥12,600	96.10720.9.01

トレフ PP チップラック



- トレフチップSlimLine全てのサイズにPP製のチップラックとリフィルをご用意しています



チップラック




チップリフィル

- トレイに96本がセットされた状態でパックされていますので、そのままPPラックに設置することができます

トレフ PC チップボックス 繰り返しのオートクレーブに最適です



- 繰り返しのオートクレーブに最適なポリカーボネイト製チップボックスです
 - チップを保管、保護します
 - 片手で開け閉めのしやすいヒンジリッドです
 - 積み重ねが可能です
- チップ128本付
使用温度範囲：-60℃～135℃

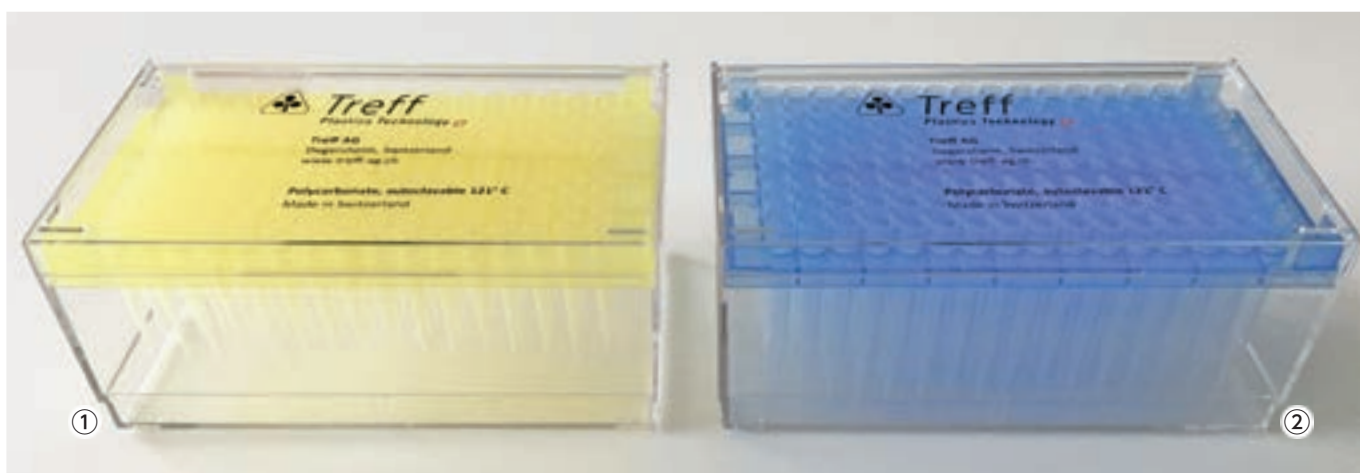

AUTOCLAVE					補充用バルクチップ(各1000本入)		
注文コード	用途	本数	価格	メーカーコード	注文コード	用途	価格
① 0307450	Slim Line 200 μ l チップ用	128 本(8 $\times$ 16 フォーマット)		96.11487.9.01	0306004	Slim Line 200 μ l チップ	¥2,600
② 0307460	Slim Line 1000 μ l チップ用	128 本(8 $\times$ 16 フォーマット)	¥6,900	96.11489.9.01	0306006	Slim Line 1000 μ l チップ	¥3,000
0307455	Slim Line 300 μ l チップ用	128 本(8 $\times$ 16 フォーマット)		96.11488.9.01	0306005	Slim Line 300 μ l チップ	¥2,700

トレフリム付チップ(1701:イエロー/200 μ l、1702:ブルー/1000 μ l)をPCチップボックスに立ててお使いいただいていたお客様には、SlimLine用の交換用トレイを無償でご提供しております。お気軽にお申し付けください(☎03-3654-6611 TOHO 営業部)。

ネプチューン バリアチップ (フィルター付)

キャンペーン


NEPTUNE

● 電子線滅菌済 ● DNAフリー ● PCRInhibitorsフリー ● DNase / RNaseフリー ● Endotoxinsフリー

SAMPLE

低吸着 S3樹脂

- Neptune 独自の S3 樹脂により低吸着を実現しています
- シリコン処理と違い、オートクレーブでの劣化や溶出の心配がありません
- * 2 μ l 未満の微量を分注する場合は BT10XL (NaturalPP) をおすすめしています

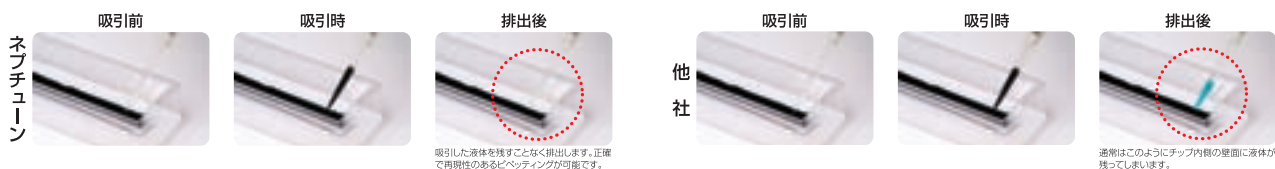

容 量	メーカーコード	注文コード	入 数	価 格	キャンペーン価格	材 質
～ 10 μ l	BT10	1013010	96 × 10	¥ 16,500 →	¥9,900	低吸着 S3
～ 10 μ l ロングタイプ	BT10XLS3	1013020	96 × 10	¥ 16,500 →	¥9,900	低吸着 S3
～ 10 μ l ロングタイプ	BT10XL	1013025	96 × 10	¥ 17,600 →	¥9,900	NaturalPP
～ 20 μ l	BT20	1013050	96 × 10	¥ 16,500 →	¥9,900	低吸着 S3
～ 100 μ l	BT100	1013060	96 × 10	¥ 16,500 →	¥9,900	低吸着 S3
～ 200 μ l	BT200	1013070	96 × 10	¥ 16,500 →	¥9,900	低吸着 S3
～ 300 μ l	BT300	1013080	96 × 10	¥ 16,500 →	¥9,900	低吸着 S3
～ 1000 μ l	BT1000.96	1013085	96 × 8	¥ 18,400 →	¥11,000	低吸着 S3
～ 1250 μ l	BT1250	1013090	96 × 8	¥ 19,100 →	¥11,400	低吸着 S3

トレフ リザーバー




- オートクレーブができるリザーバーです

注文コード	材 質	容 量	目盛り	入 数	価 格
0313430	ポリプロピレン	50 ml	10、20 ml	10 個	¥3,800

メーカーコード 96.04796.9.01

SAMPLE
AUTOCLAVE

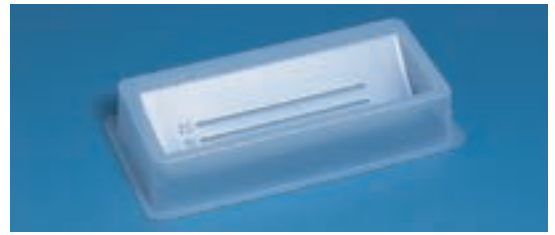

バイオ ピュアー リザーバー



- 特殊な添加物を加えることによりバクテリアや微生物がポリスチレンを生分解しますから、環境に優しいリザーバーです
- 底の小さな溝や四隅のスパウトなどの特長は従来品と同様です

10個梱包（ガンマー線滅菌済）



注文コード	サイズ(mm)	価 格	メーカーコード
0771170	100 ml	¥5,200	REBP-1000
0771175	25 ml 仕切りつき	¥4,700	REBP-2000
0771180	25 ml	¥4,700	REBP-3000
0771190	50 ml	¥5,200	REBP-5000



リザーバー（ガンマー線滅菌済み）



- 底に小さな溝が設けられていますから試薬の無駄が減少します
- 4隅にはスパウトがついていて注ぎだしに便利です
- 広いベースで安定しています
- 25 mlの仕切りつき片側は8チャンネルピペット用で、反対側は4チャンネル分の幅になっています

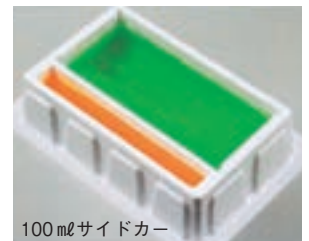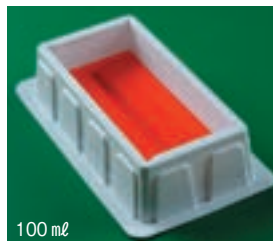

10個梱包

注文コード	容 量	価 格	メーカーコード
0771000	100 ml	¥3,700	RESE-1000
0771050	25 ml 仕切りつき	¥3,700	RESE-2000
0771100	25 ml	¥3,500	RESE-3000
0771150	100 ml サイドカー	¥4,000	RESE-4000

1個梱包

注文コード	容 量	価 格	メーカーコード
0771010	100 ml	¥940	RESE-1050
0771060	25 ml 仕切りつき	¥840	RESE-2050
0771110	25 ml	¥840	RESE-3050



100 ml リザーバーの断面：
試薬の液量が少なくなってもピペッティングがしやすく、試薬の無駄を減らすことができます25 ml も同様です

12 チャンネル リザーバー



- ポリプロピレン製の12チャンネルリザーバーです
- フットプリントはオートメーションに対応しています
- 各セクションには22 mlの液を入れることができ、ベースの8つのディンプルによりマルチチャンネルピペット使用時も液体のロスがないようにしています
- サイズ：128 (L) × 86 (W) × 44 (H) mm
- オートクレーブ：可
- カラー：ナチュラル

AUTOCLAVE

注文コード	品 名	入 数	価 格	メーカーコード
0443360	12 チャンネルリザーバー	5 個	¥9,900	1061-8150

あったら便利なお役立ちグッズ

プレート分注用

トレフ リザーバー



- オートクレーブができるリザーバーです

SAMPLE
AUTOCLAVE

注文コード	材質	容量	目盛り	入数	価格
0313430	ポリプロピレン	50ml	10、20ml	10個	¥3,800

12 チャンネル リザーバー



AUTOCLAVE

コード:0443360
1061-8150
¥9,900 / 5個


➡詳しくはP29

ウェルスタンド



コード:0763220
WPST-1000
¥15,400

角度固定式 (30°)

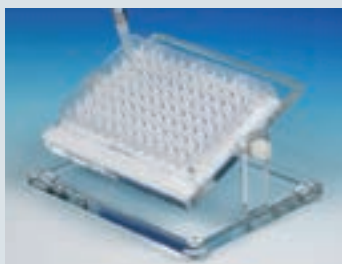

コード:0763270
WPAJ-1000
¥38,500

角度可変式

ピペッターガイド



- ウェルに沿ってピペッターを移動させるガイドです
- 付属スタンドは30°

コード:0763330 GUIDE-300
¥68,400

384ウェル カラーオリエンター

明るい色彩で行や列の識別が容易になります





横型 コード:0763140
WELL-384H
¥9,900 / 2枚



縦型 コード:0763130
WELL-384V
¥9,900 / 2枚


ウェルオリエンター

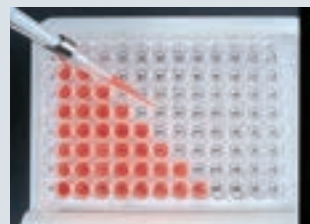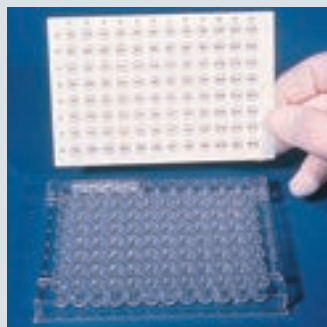

ウェルの底に座標が見えます

コード:0763210 WELL-1000
¥8,200 / 4枚

ウェルオリエンターステッカー

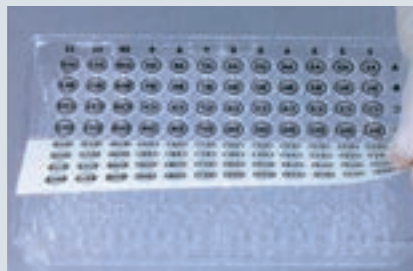

コード:0763170
WEST-1000
¥9,800 / 50枚

ウェルパッド

- 96ウェルフォーマットが印刷された記録紙です



コード:0763230
WPNP-1000
¥4,300 / 50枚

ウェルパッドに記録

96ウェル カラーオリエンター



縦型 コード:0763150
WELL-96V
¥9,900 / 2枚



横型 コード:0763160
WELL-96H
¥9,900 / 2枚

RF3000

キャンペーン



- 軽量で扱いやすく、UV 耐性のある材質
- 5色のノズルコーンが付属（オートクレーブ可）
- リチウムイオンバッテリー20時間の連続使用
- 片手で吸引、分注、スピード調整
（High / Low / Gravity）

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
0666501	RF3000	¥50,600	→ ¥39,900

メーカーコード HS3000



アクリル製ピペットラック



- ガラスやプラスチックのピペットを保護し、整理します
 - 4区画に分かれており角度がついています
 - 0.1 ~ 50 mLのピペットのほか、クライオバイアル用のケーンの整理にも便利です
- サイズ：29.1×8.8×40.1 cm

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0666000	クリアー	¥45,000	HS20611



パイポンプ 2500

弾性のあるピペットホルダー リリースバルブ

ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックFUERKALONの採用によりどのようなピペットにもピッタリフィットし、滑りやピペットの破損を防ぎます。また力を入れなくてもピペットを装着できます。



必要な量を吸い上げたり、少しずつ排出するのに使います

このレバーを押すとバルブが開き中の液体は自然落下します

注文コード	カラー	ピペット	価格
0700010	ブルー	~ 2 mL	¥5,200
0700020	グリーン	~ 10 mL	¥5,200
0700030	レッド	~ 25 mL	¥6,200
0700210	ピペットホルダー		¥690

ピペット フィラー



あらゆるサイズのピペットに

- 手元に置いておくと便利な15 mLのバルブです
- プラスチックとシリコンのアタッチメント付きです
- 容量の大小を問わずに使えます
- 試薬瓶や手にぶら下げられるようゴム紐付きです
- オートクレーブ可

AUTOCLAVE

注文コード	入数	価格	メーカーコード
0673000	3個	¥3,600	HS20623



タフタッグファミリー レーザープリンター仕様

Word



レーザー
プリンター

で印字できます

Excel データの
差し込み印刷も
簡単です



クライオタッグ

DIVERSIFIED Biotech



−196℃ ~ +150℃

¥15,700

0740000 ブランクシートのみ
¥14,100

用途	サイズ (mm)	枚数 (1シート)	合計 ラベル数	-B		-G	-O	-R	-Y	5色セット*	シリーズ
				ホワイト	ブルー	グリーン	オレンジ	レッド	イエロー		
0.5mlチューブ	24 × 13	7 × 17	2,380	0736500	0736510	0736520	0736530	0736540	0736550	0736600	LCRY-2380
1.5mlチューブ	33 × 13	5 × 17	1,700	0736000	0736010	0736020	0736030	0736040	0736050	0736100	LCRY-1700
一般のラベリング	38 × 19	5 × 12	1,200	0737000	0737010	0737020	0737030	0737040	0737050	0737100	LCRY-1200
	29 × 44	8 × 10	1,600	0737500							LCRY-1400
クライオバイアル	43 × 19	4 × 13	1,040	0738000	0738010	0738020	0738030	0738040	0738050	0738100	LCRY-1100
ラック・ボックス	67 × 25	3 × 10	600	0738500	0738510	0738520	0738530	0738540	0738550	0738600	LCRY-1258
プレート・シャーレ	38 × 6	4 × 39	3,120	0739000	0739010	0739020	0739030	0739040	0739050	0739100	SIDE-1000
	25 × 25	8 × 10	1,600	0740400							LCRY-1400
その他の用途	64 × 13	3 × 20	1,200	0740600							LCRY-2500
	76 × 51	4 × 3	240	0739500							LCRY-3020
クライオベイベー / タフスポットセット	φ 9.5 33 × 13	4 × 17	1,360	0741000	クライオベイベー とタフスポットのセットです						CMBO-1000
ブランクシート	216 × 279mm		20	0740000	216 × 279mmのブランクシートで、元々切り目を入れていないシートです						LCRY-1000

* 5色セットはブルー、グリーン、オレンジ、レッド、イエロー 各4シート

タフタッグ

DIVERSIFIED Biotech



−40℃ ~ +121℃

¥16,100

用途	サイズ (mm)	枚数 (1シート)	合計 ラベル数						5色セット*	クリアー	シリーズ
				ホワイト	−B ブルー	−G グリーン	−O オレンジ	−R レッド	−Y イエロー		
0.5ml チューブ	24 × 13	7 × 17	2,975	0725500	0725510	0725520	0725530	0725540	0725550	0725600	TTSW-2240
	24 × 13	8 × 20	3,200	0726500							TTSW-KK-20
	27 × 13	6 × 16	1,920							0726000	CLTT-3000
1.5ml チューブ	33 × 13	5 × 17	2,125	0727000	0727010	0727020	0727030	0727040	0727050	0727100	TTLW-2016
	33 × 13	6 × 21	2,520	0727500							TTLW-KK-20
一般のラベリング	38 × 19	5 × 12	1,500	0728500	0728510	0728520	0728530	0728540	0728550	0728600	TTGP-1050
	38 × 19	5 × 12	1,200							0729000	CLTT-1000
	38 × 13	5 × 16	1,600							0729500	CLTT-2000
	25 × 25	8 × 10	2,000	0730000							LTTI-1000
スライドガラス	41 × 16	4 × 16	1,600	0730500							LTTI-2000
	22 × 22	8 × 12	2,400	0731000	0731010	0731020	0731030	0731040	0731050	0731100	MISL-1000
その他のサイズ (カラーはホワイトのみです)	23 × 8	7 × 22	3,850	0732000	0.2ml PCR チューブ用						LTTM-1000
	63 × 13	3 × 20	1,500	0731500	0.5 ~ 2.0ml フラッグタッグ(文字数を多く書き込めます)						FLAG-1000
	67 × 5	3 × 33	2,475	0733000	PCRプレート / ペトリディッシュ用						SETT-1000
	216 × 279mm		25	0732500	216 × 279mm のブランクシートで、元々切り目を入れていないシートです						TTSH-1000

* 5色セットはブルー、グリーン、オレンジ、レッド、イエロー 各5シート ** ラベル間に切込みがあるだけで、余白がありません

−196℃で利用できる透明ラベル

クライオクリアー



- 透明なラベルですので、ラベルを貼っていても中のサンプルを見ることができます
- レーザープリンターで印字することができ、マーカーで書き込むこともできます

−196℃ ~ 70℃ **¥16,400**

1.5 mL チューブ用 CLEAR-170

クリアー (0741500) …ラベルサイズ: 33 × 13 mm 5 × 17 枚 / シート 合計ラベル数: 1,700 枚

0.5 mL チューブ用 CLEAR-238

クリアー (0741510) …ラベルサイズ: 24 × 13 mm 7 × 17 枚 / シート 合計ラベル数: 2,380 枚



ディープフリーザーの中のサンプルの整理に

ウェット グリップ



- 濡れた面や霜のついた面にも貼ることができます

−80℃ ~ 100℃ **¥17,000**



霜の上から貼って



とけてもはがれません

1.5 mL チューブ用 GRLA-2016

ホワイト (0749600) …ラベルサイズ: 33 × 13 mm 5 × 17 枚 / シート 合計ラベル数: 1,700 枚

0.5 mL チューブ用 GRLA-2380

ホワイト (0749620) …ラベルサイズ: 24 × 13 mm 5 × 17 枚 / シート 合計ラベル数: 2,380 枚

一般のラベリング用 GRLA-1050

ホワイト (0749640) …ラベルサイズ: 38 × 19 mm 5 × 12 枚 / シート 合計ラベル数: 1,200 枚

スライドガラス用 GRLA-1000

ホワイト (0749660) …ラベルサイズ: 22 × 22 mm 8 × 12 枚 / シート 合計ラベル数: 1,920 枚



水の中でも貼れます

タフスポット レーザープリンター仕様



−196℃ ~ 100℃ **¥15,700**

φ9.5 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用) SPOT-1000 ~ 1500 (5色: RNBW-1000)

ホワイト (0745500)、ブルー (0745510)、グリーン (0745520)
オレンジ (0745530)、レッド (0745540)、イエロー (0745550)
5色セット (0745600) …12 × 16 枚 / シート 合計ラベル数: 3,840 枚

φ11 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用) SPOT-5000

ホワイト (0745800) …13 × 18 枚 / シート 合計ラベル数: 4,680 枚

φ13 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用) SPOT-2000 ~ SPOT-2500 (5色: RNBW-1100)

ホワイト (0746000)、ブルー (0746010)、グリーン (0746020)
オレンジ (0746030)、レッド (0746040)、イエロー (0746050)
5色セット (0746100) …12 × 16 枚 / シート 合計ラベル数: 3,840 枚

φ19 mm SPOT-3000

ホワイト (0746500) …9 × 12 枚 / シート 合計ラベル数: 2,160 枚

φ25.4 mm SPOT-4000

ホワイト (0747000) …7 × 9 枚 / シート 合計ラベル数: 1,260 枚



全12色でキャップに色分け

タフスポット ロールタイプ

DIVERSIFIED BIOTECH

−196℃ ~ 80℃ ¥5,900

φ9.5 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用) T-SPOTS

ホワイト (0742000)、レッド (0742010)、グリーン (0742020)、イエロー (0742030)、
ブルー (0742040)、オレンジ (0742050)、ラベンダー (0742060)、ピンク (0742070)、
コーヒーマロン (0742080)、ゴールド (0742090)、シルバー (0742100)、ブラック (0742110) …1,000枚入

φ11 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用) T-SPOTS-44

ホワイト (0742300) …1,000枚入

φ13 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用) T-SPOTS-50

ホワイト (0742500)、レッド (0742510)、グリーン (0742520)、イエロー (0742530)、ブルー (0742540)、オレンジ (0742550)、ラベンダー (0742560)、
ピンク (0742570)、コーヒーマロン (0742580)、ゴールド (0742590)、マロン (0742600)、シルバー (0742610) …1,000枚入

φ19 mm T-SPOTS-75

ホワイト (0743000) …500枚入

¥6,800

φ25.4 mm T-SPOTS-100

ホワイト (0743500) …500枚入

¥6,800



φ4.8 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用) TS-TNY

ホワイト (0741800) …1,500枚入

φ 4.8 mm のみ

¥9,600

タフタッグとタフスポットのセット

デュアル タフタッグ

- キャップ用のスポットと、側面用のタッグのセットです
- カラーコードがついていますので視認が容易です
- 半透明ですので、貼り付けた後も中を見ることができます
- 30分以内であれば貼り替えが可能です
- 時間とともによりはがれにくくなります



−40℃ ~ 121℃ ¥14,400

デュアル タフタッグ (φ11 mm + 33 × 14 mm) 各500枚入

ブルー (0724500) COLB-1000
グリーン (0724510) COLG-1000
レッド (0724520) COLR-1000
ホワイト (0724530) COLW-1000
イエロー (0724540) COLY-1000

5列 タフスポット



φ9.5 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用)

メーカーコード
ホワイト (0744200) SPRL-1000
5色セット (0744400) SPRL-1100

φ13 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用)

メーカーコード
ホワイト (0744500) SPRL-2000
5色セット (0744700) SPRL-2100

¥23,300 5,000枚入

超低温ラベル

ベイクタッグ

DIVERSIFIED BIOTECH

+180℃ ~ −196℃ の範囲で使えるラベル



SAMPLE

注文コード	サイズ(mm)	入数	価格	メーカーコード
0749500	38 × 19	250 ラベル	¥18,900	BAKE-250

タフタッグ ステーション

DIVERSIFIED BIOTECH

- 新しいロールを入れたり空箱の取出しが簡単です
- トップレールによりロールが所定の位置にピッタリ収まります
- ステーションの上での書き込みもできます
- ロールタイプのスタンダードボックスが6個収納できます

注文コード 0761500

メーカーコード TTSA-9000

¥22,800



タフタグ / クライオタグ ロールタイプ

DIVERSIFIED BIOTECH



タフタグ -40℃ ~ 121℃

1.5 mL チューブ用 ホワイト ¥5,900 その他 ¥8,000 TTL(カラー)-1000
 クリアー (0722000)、ホワイト (0722010)、レッド (0722020)、イエロー (0722030)
 ブルー (0722040)、グリーン (0722050)、オレンジ (0722060)
 …ラベルサイズ: 33 × 13 mm 1,000枚入

0.5 mL チューブ用 ホワイト ¥5,900 その他 ¥6,900 TTS(カラー)-1000
 クリアー (0722500)、ホワイト (0722510)、レッド (0722520)、イエロー (0722530)
 ブルー (0722540)、グリーン (0722550)、オレンジ (0722560)
 …ラベルサイズ: 24 × 13 mm 1,000枚入

0.2 mL PCR チューブ用 ティーニータフタグ TT-TNY
 ホワイト (0723000) …ラベルサイズ: 21 × 7 mm 1,500枚入 ¥6,900

プレート、シャーレ用 TT-SWALL
 ホワイト (0723500) …ラベルサイズ: 38 × 6 mm 1,000枚入 ¥6,900

一般のラベリング用 TTGP-1000
 ホワイト (0724000) …ラベルサイズ: 38 × 19 mm 1,000枚入 ¥11,200



クライオタグ -196℃ ~ 80℃

0.5 mL チューブ用 CRY-0500 ¥6,900
 ホワイト (0733500) …ラベルサイズ: 24 × 13 mm 1,000枚入

1.5 mL チューブ用 CRY-1000 ¥6,900
 ホワイト (0734000) …ラベルサイズ: 33 × 13 mm 1,000枚入

一般のラベリング用 CRY-2000 ¥6,900
 ホワイト (0734500) …ラベルサイズ: 38 × 19 mm 1,000枚入


ライト プロテクト -196℃ ~ 121℃

DIVERSIFIED BIOTECH

●書き込んだ文字が消えないように保護します

¥7,300 / 1,000枚

注文コード 0761600 注文コード 0761610
 メーカーコード WRIT-1000 メーカーコード WRIT-2000
 0.5 mL チューブ用 1.5 mL チューブ用
 31.7 × 12.7 mm 40.6 × 16.0 mm

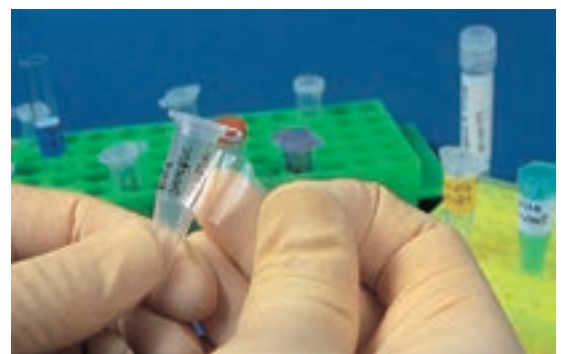

溶剤耐性ペン (ブラック)

DIVERSIFIED BIOTECH

- キシレン、アルコール、DMSO など、多くの溶剤に耐性のあるペンです
- アセトンが含まれている場合でもそれなりの耐性があり、使用できることもあります
- ヒストカセット、スライドガラス、クライオバイアルなどにおすすめです
- 書いた文字はこすれにくく、臭わず、色あせしにくくなっています


*つや消しや塗装された面にはお使いになれません

注文コード	品名	入数	価格	メーカーコード
0765401	溶剤耐性ペン ブラック	1本	¥2,000	1000-BLACK



ダイレクト サーマル プリンター MDPI-3000

DIVERSIFIED BIOTECH

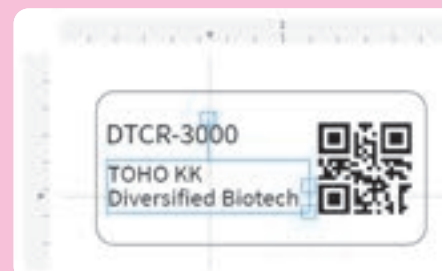

LabelLIVEソフトウェアでラベルのデザインは自由自在です

- テキストやバーコード（QRコード）を解像度300dpiで印字します
- WindowsにもMacにも使いやすい"LabelLIVE"ソフトウェアをご利用いただけます（このプリンターをご使用の際はライセンスが必要ありません）
- ダイレクトサーマルクライオタグ用のテンプレートをご用意しています

サイズ（W×D×H）：203×254×178mm

注文コード	品名	価 格	メーカーコード
0754800	ダイレクトサーマルプリンター MDPI-3000	¥131,000	MDPI-3000

ダイレクトサーマル クライオタグ -196℃ ~ 70℃

DIVERSIFIED BIOTECH

- ダイレクトサーマルプリンター（上記MDPI-3000もしくはDYMO-400/450）用のクライオタグで、ラベルが感熱紙になっています
- 必要な時に必要なだけ印刷ができますので、経済的です
- LabelLIVEもしくはDYMOソフトウェア用のテンプレートをご利用いただけます
- DYMO 400/450 プリンターをお持ちであればそのままお使いになれます（DYMO-500シリーズ以降は対応しておりません）

注文コード	カラー	サイズ(mm)	用 途	ラベル数	価 格	メーカーコード
0754650	ホワイト	27 × 13	0.5ml	1,000	¥10,100	DTCR-1000
0754652	ホワイト	38 × 13	1.5ml	750	¥9,300	DTCR-2000
0754653	ホワイト	38 × 19	2.0ml	750	¥10,100	DTCR-3000
0754654	ホワイト	φ 9.5	0.5ml	4,000	¥15,100	DTCR-4000
0754655	ホワイト	51 × 6	プレート	1,000	¥19,400	DTCR-5000
0754656	ホワイト	38 × 13 / φ 9.5	1.5ml	1,000	¥13,600	DTCR-6000



シャムロック ラベリング テープ



13 mm 幅のサンプルロールをご用意しています

- ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます
- ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます
- 油、水に強く、また耐酸性もすぐれています
- -15℃から+43℃の範囲でご使用になれます
- いちど貼ったテープを他に貼り替える事もでき、はがした面に糊が残りません

注文コード/価格表 (テープの長さ: 12.7m)

No.	カラー	価格	13 mm ¥1,200	20 mm ¥1,600	25 mm ¥2,100	38 mm ¥3,300	50 mm ¥3,600
1	ホワイト		0350010	0351010	0352010	0353010	0354010
2	イエロー		0350020	0351020	0352020	0353020	0354020
3	グリーン		0350030	0351030	0352030	0353030	0354030
4	レッド		0350040	0351040	0352040	0353040	0354040
5	オレンジ		0350050	0351050	0352050	0353050	0354050
6	ブルー		0350060	0351060	0352060	0353060	0354060
7	ピンク		0350070	0351070	0352070	0353070	0354070
10	カッパー		0350100	0351100	0352100	0353100	0354100
11	ローズ		0350110	0351110	0352110	0353110	0354110
12	バイオレット		0350120	0351120	0352120	0353120	0354120
13	ラベンダー		0350130	0351130	0352130	0353130	0354130
15	ライム		0350150	0351150	0352150	0353150	0354150
16	アクア		0350160	0351160	0352160	0353160	0354160
17	シャトルーズ		0350170	0351170	0352170	0353170	0354170
18	ゴールド		0350180	0351180	0352180	0353180	0354180
19	シルバー		0350190	0351190	0352190	0353190	0354190
メーカーコード			ST-12-	ST-34-	ST-10-	ST-11-	ST-20-

テープディスペンサー 多連用 (テープは別売です)

注文コード	品名	設置本数 (13mm幅テープ)	サイズ (W) × (D) × (H)	価格
0356480	テープディスペンサー MD-150C	5 本	85 × 159 × 77mm	¥31,000
0356490	テープディスペンサー MD-250C	10 本	169 × 159 × 78mm	¥40,400
0356500	テープディスペンサー MD-350C	15 本	253 × 159 × 79mm	¥45,800
0356505	テープディスペンサー MD-450C	20 本	337 × 159 × 80mm	¥51,600



テープディスペンサーは MD-150C

テープディスペンサーは MD-250C



テープディスペンサーは MD-350C



テープディスペンサーは MD-450C

ハイロー テンプ テープ



- シャムロック スペシャルティ ハイロー テンプテープはクロス地でできておりどのような容器にもしっかりとつき、酸、アルカリ、オイル、グリス等に対しても丈夫です
- 260℃ (498°F) のドライオープンの中でもテープが割れたり剥がれたりすることがありません
- -60℃ でもしっかりとつき剥がれることがありません
- 書き込みもでき、またご希望の印刷を施した特注品もあります


SAMPLE

ハイローテンプテープ (長さ: 6.35 m)

注文コード	テープ幅 (mm)	価格	メーカーコード
0370130	13	¥6,200	SHLT-12
0370200	20	¥7,600	SHLT-34
0370250	25	¥10,200	SHLT-10



プリントされた特注品

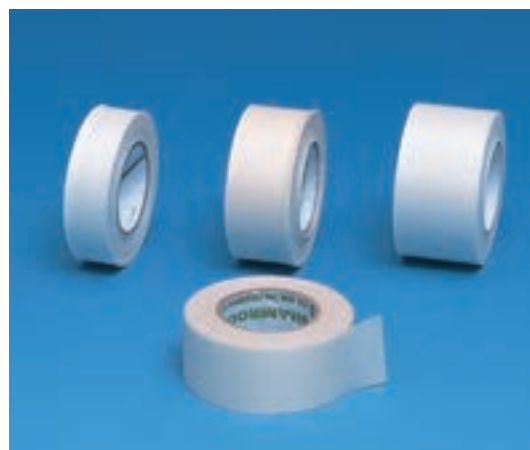

10色 6サイズ

ドット ラベル



カラーは10色（5色はモダンな蛍光色） サイズは6種類（6.5mm～32mm）

- シャムロックのスペシャルティドットラベルは、カラーコーディング、識別、又は特別に人の注意を引きつけるために理想的です
- ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどによって書き込みができます
- φ6.5mmは0.5mℓのマイクロチューブ、φ11mmは1.5mℓマイクロチューブにぴったりのサイズです
- -53℃～71℃まで使用可能

注文コードおよび価格（1000ドット）

SAMPLE

No.	カラー	カラーサンプル	φ 6.5 mm	φ 11 mm	φ 13 mm	φ 19 mm	φ 25 mm	φ 32 mm
1	ホワイト		0360010	0361010	0362010	0363010	0364010	0365010
6	ブルー		0360060	0361060	0362060	0363060	0364060	0365060
16	アクア		0360160	0361160	0362160	0363160	0364160	0365160
18	ゴールド		0360180	0361180	0362180	0363180	0364180	0365180
19	シルバー		0360190	0361190	0362190	0363190	0364190	0365190
27	レッド(蛍光色)		0360270	0361270	0362270	0363270	0364270	0365270
28	オレンジ(蛍光色)		0360280	0361280	0362280	0363280	0364280	0365280
29	グリーン(蛍光色)		0360290	0361290	0362290	0363290	0364290	0365290
30	シャトルーズ(蛍光色)		0360300	0361300	0362300	0363300	0364300	0365300
31	ピンク(蛍光色)		0360310	0361310	0362310	0363310	0364310	0365310
メーカーコード			SDL-25-	SDL-43-	SDL-50-	SDL-75-	SDL-100-	SDL-125-
価 格			¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥4,300	¥5,500	¥9,800

5色/10色セット価格

注文コード	直 径	セット	カラーNo.	各色ドット	合計ドット	価 格
0360500	6.5 mm	5 色	1,6,16,18,19	192	960	¥3,900
0360600		5 色	27,28,29,30,31	192	960	
0360700		10 色	全 10 色	96	960	
0361500	11 mm	5 色	1,6,16,18,19	192	960	¥3,900
0361600		5 色	27,28,29,30,31	192	960	
0361700		10 色	全 10 色	96	960	
0362500	13 mm	5 色	1,6,16,18,19	210	1050	¥4,200
0362600		5 色	27,28,29,30,31	210	1050	
0362700		10 色	全 10 色	105	1050	
0363500	19 mm	5 色	1,6,16,18,19	180	900	¥5,000
0363600		5 色	27,28,29,30,31	180	900	
0363700		10 色	全 10 色	90	900	
0364500	25 mm	5 色	1,6,16,18,19	200	1000	¥7,100
0364600		5 色	27,28,29,30,31	200	1000	
0364700		10 色	全 10 色	100	1000	
0365500	32 mm	5 色	1,6,16,18,19	192	960	¥12,000
0365600		5 色	27,28,29,30,31	192	960	
0365700		10 色	全 10 色	96	960	

備考：カラーNo.1～19はホワイト、ブルー、アクア、ゴールド、シルバーの5色
No.27～31はレッド、オレンジ、グリーン、シャトルーズ、ピンクの5色（蛍光色）
No.1～31は上記全10色
カラーの組み合わせは上記の3セットに限らせて頂きます。

ハイ テンプ インディケーター テープ (乾熱滅菌用)



- シャムロック スペシャルティ ハイテンプ インディケーターテープはクロス地でできており“STERILIZED”の文字が濃くなることにより乾熱滅菌済みであることを表示します
- どのような表面、形状にもつき、287℃ (550°F) のドライオープンの中でも剥がれません
- 耐酸、アルカリ、オイル、グリスにもすぐれています

SAMPLE

ハイ テンプインディケーターテープ (長さ: 6.35 m)

注文コード	テープ幅(mm)	価 格	メーカーコード
0371130	13	¥6,800	SHTI-12
0371200	20	¥9,000	SHTI-34
0371250	25	¥10,300	SHTI-10

サンプルロール

インディケーターテープ (オートクレーブ用)

※文字の大きさ、フォントは変更されることがございます



- オートクレーブでの滅菌処理を行うと“STERILIZED”の文字によりオートクレーブによる滅菌済みであることを表示します
- テープに書き込みが出来ます
- テープの長さはすべて12.7mです

SAMPLE

SIT-12, SIT-34, SIT-10

注文コード	テープ幅(mm)	価 格	メーカーコード
0372130	13	¥1,500	SIT-12
0372200	20	¥1,900	SIT-34
0372250	25	¥2,400	SIT-10

サンプルロール



SIL-34-B, SIL-10-B

- テープの淵にレッド、イエロー、グリーン、ブルー又はブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます

SIL-34-B	テープ幅: 20 mm	SIL-10-B	テープ幅: 25 mm
注文コード	帯のカラー	注文コード	帯のカラー
0373200	レッド	0373250	レッド
0373210	イエロー	0373260	イエロー
0373220	グリーン	0373270	グリーン
0373230	ブルー	0373280	ブルー
0373240	ブラック	0373290	ブラック

価 格: ¥2,000

価 格: ¥2,700



SIL-34, SIL-10

- オートクレーブで通常の滅菌処理を行うと“CONTAMINATED”の文字の上に“STERILIZED”の文字が現れます

注文コード	テープ幅(mm)	価 格	メーカーコード
0374200	20	¥2,000	SIL-34
0374250	25	¥2,700	SIL-10



SIL-34-1, SIL-10-1

- テープにバッチナンバーや日付を書き込む欄が印刷されています

注文コード	テープ幅(mm)	価 格	メーカーコード
0375200	20	¥2,000	SIL-34-1
0375250	25	¥2,700	SIL-10-1

注意: インディケーター テープ(乾熱滅菌、オートクレーブとも)は滅菌処理前か処理済みかを表示するものであって、滅菌器の温度をチェックするものではありません。滅菌器の温度管理は別途行って下さい。

バイオハザード ラベル



- 鮮やかな蛍光色によって見落とすことはありません
- 優れた粘着性により使いやすいラベルです
- 器具、容器、部屋、危険物質、実験動物等でご使用下さい

バイオハザード廃棄物を他の廃棄物と明確に区別できるようバッグや容器にご使用下さい。



SBH-1 60×75 mm



SBH-3 195×254 mm



SBH-4 25×76 mm



SBH-8-L 8×20 mm



SBH-8 25×25 mm



SBH-5 57×88 mm



SBH-W2 210×177 mm



SBH-9 76×106 mm



SBH-8-D
φ 25 mm

ディスペンサーボックス



- SBH-8、SBH-8-D、SBH-8-Lは、便利なディスペンサーボックスに入っています

バイオハザード ラベル

SAMPLE

注文コード	サイズ(mm)	枚数	価格	メーカーコード
0378010	60×57	500 枚 / ロール	¥8,500	SBH-1
0378030	195×254	10 枚	¥4,800	SBH-3
0378040	25×76	500 枚 / ロール	¥8,500	SBH-4
0378050	57×88	100 枚	¥6,100	SBH-5
0378080	25×25	500 枚 / ロール	¥3,900	SBH-8
0378120	φ 25	500 枚 / ロール	¥3,900	SBH-8-D
0378130	8×20	500 枚 / ロール	¥3,900	SBH-8-L
0378090	76×106	100 枚	¥7,400	SBH-9
0378110	210×177	100 枚	¥12,600	SBH-W2

放射線ラベル



- うすい黄色地に深紅色での印刷が施してあります
- 視覚による警告が必要とされるあらゆる所でご使用下さい

- 必要事項はペン、鉛筆、フェルトマーカーやゴム印等でご記入下さい
- テープタイプですからハサミで切ってお使い下さい

SAMPLE



SRA-1



SRA-2



SRA-3



SRA-4



SRA-5



SRA-6



SRA-10



SRA-11

注文コード	テープ幅(mm)	テープの長さ(m)	価格	メーカーコード
0377010	25	12.7	¥3,200	SRA-1
0377020	25	12.7	¥3,200	SRA-2
0377030	25	12.7	¥3,200	SRA-3
0377040	25	12.7	¥3,200	SRA-4
0377050	38	12.7	¥3,900	SRA-5
0377060	50	12.7	¥4,500	SRA-6
0377100	13	12.7	¥2,200	SRA-10

RI用ドットラベル φ 6.5 mm

マイクロテストチューブ等の容器ひとつひとつに貼ってRIサンプルの識別にお使い下さい。

SAMPLE

注文コード	サイズ(mm)	価格/1000ドット	メーカーコード
0377110	φ 6.5	¥4,700	SRA-11

麻酔薬ラベル



- シャムロックの麻酔薬ラベルは薬品同士の混乱を避けるために、カラーコードされ薬品名が印刷されたラベルです
- 注射筒にしっかりと付き、はがしても糊が残りません
- 薬品名の他に、書き込みのできるスペースがあります
- テープ幅：13mm 長さ：12.7m

価格
¥2,300/-巻

薬品名例：



※薬品名、表記情報の形式も豊富にご用意しています。
※通常はテープのタイプを販売していますが、シート状のものもございます。
別途ご照会下さい。

マーキング テープ



- ハサミやピンセットなどをその用途、使用者、使用する部屋などに応じて区別する必要があるときに便利です
- ビニール製のテープでさまざまな形状のものにしっかりと付き、酸、アルカリ、オイルなどがついて剥がれません
- 色は9色あり長さは約5mで金属製の容器に入っています



SAMPLE			
注文コード	カラー	入 数	価 格
0384000	ブラック	1	¥3,800
0384010	レッド	1	
0384020	ライトブルー	1	
0384030	イエロー	1	
0384040	ライトグリーン	1	
0384050	パープル	1	
0384060	ホワイト	1	
0384090	ダークグリーン	1	
0384100	グレー	1	

デュラシール

耐有機溶媒・耐熱性の点で従来のラボフィルムにご不満の方に朗報!!耐有機溶媒・耐熱性の点で従来のラボフィルムと比較してみてください。

フェノール、クロロフォルム、四塩化炭素、ベンゼン等々……電子レンジでのボイルにも!!



耐薬品性…/ ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にOK。

耐熱性…/ 電子レンジでもOK。100℃でも使用可能です。

丈夫です…/ 大変良く伸び丈夫です。

密着性…/ 伸ばすと密着性ができます。

密閉性…/ 気密性に優れています。

デュラシールを容器の口にあてがい左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下に引いて容器にくっつけて下さい。

引きが不十分だと粘着性ができません。



気密性に優れた、タイトなシーリングができます。



SAMPLE

注文コード	品名	サイズ	価格	メーカーコード
0760000	デュラシール	5 cm × 152 m	¥11,900	DS2-500
0760010	デュラシール	10 cm × 152 m	¥21,800	DS4-500
0760015	デュラシール	10 cm × 76 m	¥18,200	DS4-250
0760050	テストチューブシール	2.5 cm × 45.6 m	¥7,100	DS1-150
0760140	※デュラシャープ(専用ハサミ)		¥4,400	DSH-100

※デュラシャープはサンプルのご用意がありません

クライオ グローブ / エプロン



クライオ グローブ（撥水タイプ）

- 超低温（-196℃）から手の保護用グローブです
- 最新の材料の多層構造で温度の遮蔽、柔軟性、操作性など低温からの保護に求められる要素をすべて備えています
- 温度からの保護と同時に手が自由に動かせ安全性と機能性が備わっています
- 乾燥を保つ裏地による快適な着用ができますから長時間の作業にも最適です
- EU基準EN511、EN388、EN420に適合しています

撥水タイプ

サイズ	リスト		ミッドアーム		エルボー		ショルダー	
	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード
S	0680000	WRS	0680010	MAS	0680020	EBS	0680030	SHS
M	0680002	WRM	0680012	MAM	0680022	EBM	0680032	SHM
L	0680004	WRL	0680014	MAL	0680024	EBL	0680034	SHL
XL	0680006	WRXL	0680016	MAXL	0680026	EBXL	0680036	SHXL
価 格	¥35,000		¥38,000		¥46,000		¥61,000	
全 長 (mm)	280 ~ 325		330 ~ 395		435 ~ 495		620 ~ 695	

完全防水タイプ

サイズ	リスト		ミッドアーム		エルボー		ショルダー	
	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード
S	0680050	WRSWP	0680060	MASWP	0680070	EBSWP	0680080	SHSWP
M	0680052	WRMWP	0680062	MAMWP	0680072	EBMWP	0680082	SHMWP
L	0680054	WRLWP	0680064	MALWP	0680074	EBLWP	0680084	SHLWP
XL	0680056	WRXLWP	0680066	MAXLWP	0680076	EBXLWP	0680086	SHXLWP
価 格	¥43,000		¥46,000		¥57,000		¥72,000	
全 長 (mm)	280 ~ 325		330 ~ 395		435 ~ 495		620 ~ 695	



クライオ・グリップ グローブ（完全防水タイプ）

- クライオグローブ完全防水と同様に超低温（-196℃）から手を守るグローブで、小さいものが握みやすいように手のひらと指（親指を除く）に加工が施されています

クライオ・グリップ 完全防水タイプ

サイズ	リスト		ミッドアーム		エルボー	
	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード
S	0680100	CGWRSWP	0680110	CGMASWP	0680120	CGEBSWP
M	0680102	CGWRMWP	0680112	CGMAMWP	0680122	CGEBMWP
L	0680104	CGWRLLWP	0680114	CGMALWP	0680124	CGEBLWP
XL	0680106	CGWRXLWP	0680116	CGMAXLWP	0680126	CGEBXLWP
価 格	¥51,000		¥55,000		¥65,000	
全 長 (mm)	280 ~ 325		330 ~ 395		435 ~ 495	



グローブのフィッティングガイド

超低温の液体が充填するなどの事態が発生した場合には、腕を一振り外せるような余裕のあるグローブを選択して下さい。

小さくてピッタリしたグローブは熱の損失につながるため避けて下さい。

軍手などインナーグローブとして使用しないで下さい。

危険が伴うことがあります。

テンプシールドは素早く外せるサイズになっています。

右記の測定方法で自身のサイズを測りサイズ表の中から選択してください。

ご自身の手の大きさの測り方とグローブのサイズ



サイズ	手の長さ(mm)
S	171
M	182
L	192
XL	204



手の周囲(mm)
178-202
203-228
229-253
279-304

クライオ エプロン

- 跳ね返った低温物質や低温物質との接触を防ぎます
- -196℃といった超低温物質から保護します
- 最新の材料が使用されている軽量のエプロンで快適で動作の邪魔にならないエプロンです
首とウエストについているストラップは長さが調節でき、素早く脱着することができます

注文コード	幅 × 長さ(cm)	価 格	メーカーコード
0680800	61 × 91	¥43,000	CA36
0680810	61 × 106	¥46,000	CA42
0680820	61 × 121	¥51,000	CA48



濃縮液体洗剤 (研究・産業用)



特徴

- 経済的な濃縮液で、洗浄後のクリーナーのすすぎが楽です
- 水によく混ざります
- 経口毒性はありません

実験器具、金属部品、コンピューターチップ、加工処理設備、メンブレンフィルター、製薬におけるタンク、体内に埋め込む装置などさまざまな種類の硬い表面についた汚れを取り除きます

50~100倍希釈

ベストセラー

マイクロ - 90 濃縮液体洗剤

キャンペーン

SAMPLE



特徴

- 強力、多目的クリーナーで産業用から厳しい条件のクリーニングにお使いになれます
- キレート剤、イオン性、非イオン性成分のユニークな処方が多様なクリーニング作用をもたらし汚れを浮上、分解、乳化、封鎖、懸濁します

標的となる汚れ

実験用具、セラミック、ステンレス、詰まったメンブレンなどについたオイル、グリス、ワックス、タール、フラックス、微粒子、硬水によるしみ、生物学的残渣など

洗浄の方法

浸漬、手洗い、超音波、マイルドな攪拌など

使用最高温度

66℃

注文コード	価格(1ℓ)	キャンペーン価格	メーカーコード
0850010	¥3,500	→ ¥2,800	M-9050-12

20% OFF



ラボの日常タスクに鮮やかなカラーを

ラボ 乾燥ラック



- 大小2種類のペグは、自由に配置することができます
- ドライイングバスケットにはスターラーバーなどの小物を置くことができるほか、ピペットを置くための溝がついています
- ペグの角度は大きなもの、重いものも安全に設置できるように最適化しています
- SureGrip Hook (特許申請中) により、ガラスをしっかりと保持します
- 自立させることも、壁にかけられることも可能です
- 耐荷重: 34.9kg



SureGrip Hook

この形状により、ガラス容器をしっかりと保持します



ドライイングバスケット

スターラーバーなどの小物を置くことができるほか、ピペットを置くための溝がついています



セットに含まれるもの

- ペグ72本
(スモール36本=グリーン、
ラージ36本=ブルー)
- ドライイングバスケット2個
- ドレインチューブ (排水用)
- 壁掛け用治具セット


注文コード	品名	価格	メーカーコード
0668910	ラボ乾燥ラック	¥75,000	120791

License To Kill

殺しのライセンス LTK-008

- 標的はDNA、RNA、DNase、RNase、バクテリア、ファージ等々
- 実験台表面・器具・ピペットシャフトの殺菌に
- スプレーボトル、チェックペーパーつき

注文コード	価格(500 ml)	メーカーコード
0930600	¥27,600	LTK-008

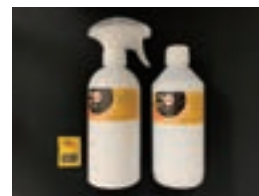

ディスポ ドレープ

キャンペーン



RI、バイオハザード物質を散らさないために経済的な
ディスポドレープは実験台や解剖台をコンタミから護ります

- ポリエチレンでラミネートされたティッシュです
- 50cm幅で長さは50mです (1ロール)
- 実験台や動物解剖の台に敷けばコンタミが防げます
- 切り易いように38cmごとにミシン目が入っています
- RIサンプルを扱う場合にもお使い下さい

注文コード	品名	幅	長さ	入数	価格	キャンペーン価格
0980000	ディスポドレープ	50 cm	50 m	6 ロール	¥14,700	→ ¥11,700

SAMPLE

20% OFF



水位警報器 TELLI (テリー)

キャンペーン


CPLabSafety

廃液があふれるのを未然に防ぎます



液面がTelliの高さまで上がると…

警報音と音声でお知らせします

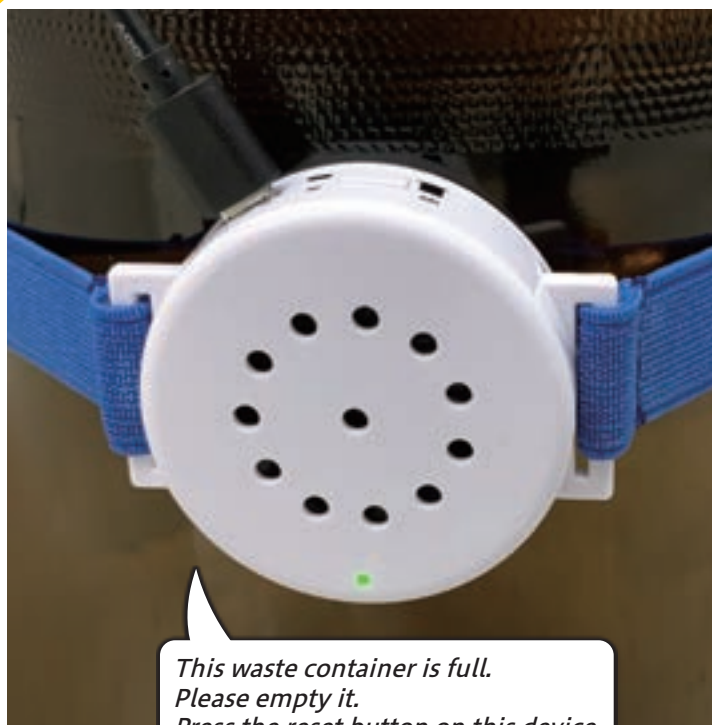

*This waste container is full.
Please empty it.
Press the reset button on this device
to restart the liquid level monitor.*

【 特長 】

- 容器の液面がTELLIの取付位置まで上がると、音声によりお知らせします
- 直径2インチ（約5cm）のコンパクトサイズです
- USBからの継続的な電源供給により、バッテリー切れの心配がありません
- 安全、経済的で、使い方も非常に簡単です
- 容器の材質は、プラスチックでもガラスでも構いません
（金属の容器にはお使いになれません）

仕 様

電源：USBケーブル（長さ約2.5m）…USBコンセント付き
取付バンド：容器の外周37.5～138cm、最大容器径44cm、最小容器径12cm
センサー：音波による
デザイン：ボタン1か所、ON-OFFスイッチ、電源用USBポート

注文コード：0814900

メーカーコード：CP-TELLI-01

価格：¥49,500 → **¥39,600**


セーフティー エコ ファネル

ラボの作業環境の改善に
廃液の蒸気をシャットアウト

- 1 廃液をタンクに安全に流し込み
- 2 外に漏れ出す蒸発エリアを小さく
- 3 開閉時以外は密閉

廃液が蒸発して、それが作業環境に放散されている状態

蒸発する液面の面積が大きく、廃液タンクの中に充満

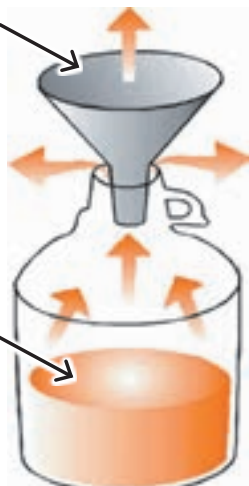


一般的な保管



取り外し可能なネットで固形物やスターラーバーをキャッチします

セーフティー
エコ ファネル

ガスケットとラッチにより、開けたとき以外は廃液の蒸気をシャットアウト

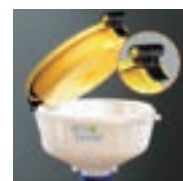

蒸発し、外に漏れだす可能性のある面は、パイプ部分のごく限られた面積



安全に廃液をタンクに流しこみ、ガスケットとラッチで蒸気を**密閉**します
お客様が今お使いのタンクに加工して取り付けます（口の内径が 5cm 以上の場合）



キャップ加工費込の価格

注文コード	品名	カラー	価格
0806800	101 mm セーフティーエコファネル	レッド	¥48,500
0806801	101 mm セーフティーエコファネル	イエロー	¥48,500
0809600	203 mm セーフティーエコファネル	レッド	¥53,600
0809601	203 mm セーフティーエコファネル	イエロー	¥53,600

キャップ加工費なし（エコファネル単体）

注文コード	品名	カラー	価格
0806000	101 mm セーフティエコファネル	レッド	¥40,500
0806001	101 mm セーフティエコファネル	イエロー	¥40,500
0808000	203 mm セーフティエコファネル	レッド	¥51,200
0808001	203 mm セーフティエコファネル	イエロー	¥51,200

キャップ加工までの流れ

1. ご使用予定のタンクの口の内径が **5cm 以上** であることをご確認ください。
2. ご注文時はタンクの **キャップのみ** 弊社にお送りください。
3. キャップを加工し、セーフティーエコファネルを取り付けて、すぐにタンクに設置できる状態でお送りいたします。

2mag スターラー ミックスドライブ + ミックスコントロール


- ミックスドライブはベーシックとHTの2種類があり（キューベットドライブは除く）、合計13機種の中からお選びいただけます
- ミックスコントロールはドライブの種類、コントロールする台数によって3機種の中からお選びいただけます

動く箇所なし
磨耗箇所なし

電磁誘導式

水中

高温対応

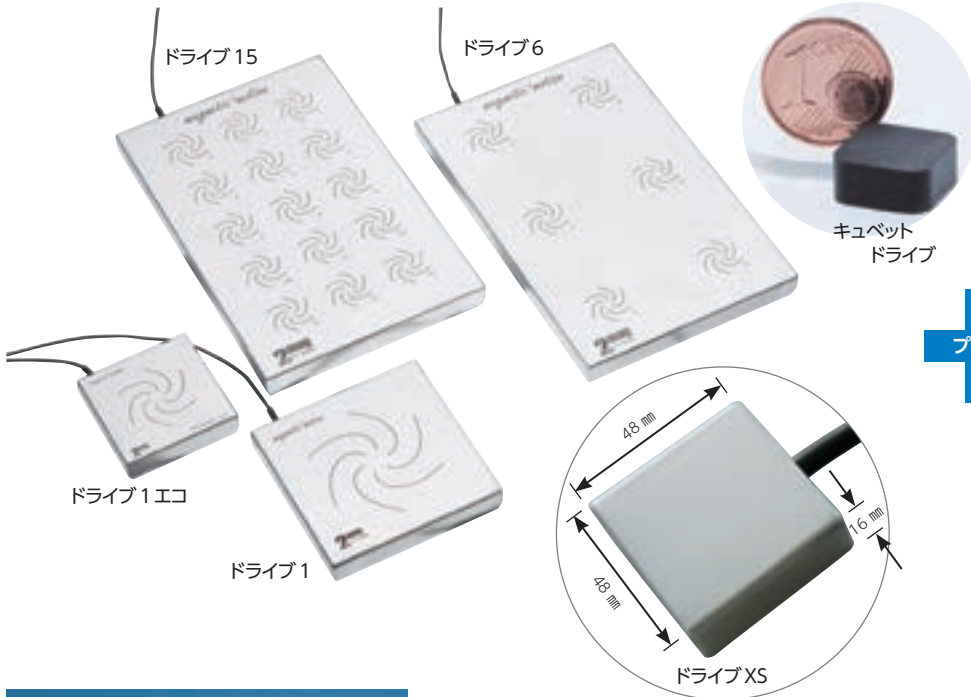

プラス



ミックスコントロールエコ



ミックスコントロール20



ミックスコントロール40

【ミックスコントロール全3モデル】



ミックスコントロール ベーシック、HT 両シリーズに共通です

	ミックスコントロール エコ	ミックスコントロール 20	ミックスコントロール 40
スピード範囲	120 ~ 1,200rpm	100 ~ 1,600rpm	100 ~ 2,000rpm
攪拌出力	10W (固定)	5 / 10 / 15 / 20W	4 ~ 40W (10 段階)
ドライブ接続	1 台	1 台	2 台
注文コード	1005200	1005210	1005220
価 格	¥99,000	¥199,000	¥276,000
メーカーコード	90100	90200	90400

※ドライブの最大出力に合わせてご選択下さい（ディストリボックス使用時を除く）

ミックスドライブ 電磁誘導式 水中（ベーシック） 水中または高温（HT）

		キューベットドライブ	ドライブXS	ドライブ1エコ	ドライブ1	ドライブ6	ドライブ15	ドライブ60
共通仕様	攪拌点	1	1	1	1	6	15	60
	攪拌容量	~ 25 ml	~ 1,000 ml	~ 3,000 ml	~ 10,000 ml	~ 3,000 ml	~ 3,000 ml	~ 500 ml
	最大出力	10W	10W	10W	20W	40W	40W	40W
ベーシック - 10 ~ 50℃	注文コード	1005095	1005100	1005110	1005120	1005130	1005140	1005145
	価 格	¥83,200	¥70,000	¥73,500	¥89,600	¥331,000	¥425,000	¥617,000
	メーカーコード	40400	40300	40101	40001	40006	40015	40060
HT - 10 ~ 200℃ (水中 ~ 95℃)	注文コード		1005150	1005160	1005170	1005180	1005190	1005195
	価 格		¥108,000	¥110,000	¥138,000	¥529,000	¥622,000	¥860,000
	メーカーコード		40303	40301	40201	40206	40215	40260
適合ミックス コントロール	エコ	○	○	○	○	○	○	○
	20	×	×	×	○	○	○	○
	40	×	×	×	×	○	○	○

その他のオプション

ミックスドライブを偶数台単位で増設できます

1005250
メーカーコード49004
ディストリボックス4
¥67,700

1005260
メーカーコード49008
ディストリボックス8
¥95,700



ディストリボックス4

ミックスシリーズ コントローラー 一体型

電磁誘導式

- 摩耗箇所がなく、メンテナンスフリーの電磁誘導式マグネチックスターラーです
- 出力の切り替えができます（ミックス1エコ、ミックス15エコは除く）
粘性の高い液体や大容量を攪拌する場合は高く、発熱を抑えて長時間連続運転をする場合は低く、最適な出力を選択することができます
- ソフトスタート機能により攪拌子をしっかりとキャッチ、センタリングし、安全に加速します



～10,000 ml ミックス1




～3,000 ml ミックス1エコ



～3,000 ml アキュミックス


在庫限定2台
キャンペーン

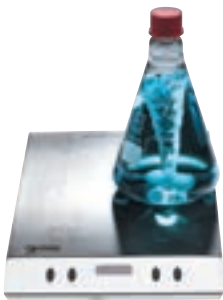

～3,000 ml ミックス6



～3,000 ml ミックス15

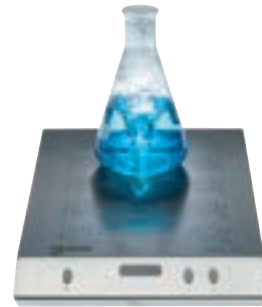

～1,500 ml ミックス15エコ

	ミックス1	ミックス1エコ	アキュミックス※	ミックス6	ミックス15	ミックス15エコ
攪拌点	1	1	1	6	15	15
攪拌点の間隔	—	—	—	130 mm	65 mm	65 mm
スピード範囲	100 ～ 2,000rpm	120 ～ 1,400rpm	100 ～ 1,600rpm	100 ～ 2,000rpm	100 ～ 2,000rpm	120 ～ 1,200rpm
最大出力	20W	10W	10W	20W	20W	10W
出力セット	4段階	固定	2段階	4段階	4段階	固定
注文コード	1005010	1005020	1005030	1005050	1005060	1005070
価 格	¥196,000	¥119,000	¥67,000	¥490,000	¥613,000	¥324,000
メーカーコード	30001	30101	30401	30006	30015	30115

※1005030 アキュミックスは在庫限りです

スターラーバー アステロイド SmCo サマリウムコバルト磁石

2mag社のこだわりが凝縮された、ハイパフォーマンススターラーバー



アステロイド 25

サイズ：14×25mm
注文コード：1006125
メーカーコード：44025
価格：¥11,200

アステロイド 40

サイズ：28×40mm
注文コード：1006140
メーカーコード：44040
価格：¥15,800

アステロイド 70

サイズ：39×70mm
注文コード：1006170
メーカーコード：44070
価格：¥65,000

- SmCo磁石を使用しており、強力で劣化のしにくいスターラーバーです
- 攪拌効率を高める形状で、大容量・高粘度・スターラーと距離がある場合、難しい形状の容器を使用する場合などで特に威力を発揮します
- 表面は凸面形状になっており、容器とこすれた際の摩耗もしにくく、高速回転にも適しています
- PTFEはFDA準拠、121℃でのオートクレーブが可能です

スターラー バー PTFE 製



- 使用されている PTFE は FDA 及び USP Class VI で承認されています
- 研磨仕上げにより、ピックアップやクロスコンタミが軽減されます

●耐薬品性に優れ、使用温度は $-200^{\circ}\text{C} \sim +280^{\circ}\text{C}$ です

オーバル



底が丸いフラスコ用です

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2002711	10×5	¥330	001.610
2002721	15×6	¥300	001.615
2002731	20×10	¥420	001.620
2002741	25×10	¥450	001.625.10
2002751	25×12	¥560	001.625
2002781	35×13	¥540	001.635.13
2002791	35×16	¥900	001.635

オクトバル



オーバルやピボットリングと同様に底が丸いフラスコ用です

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2003011	19×10	¥520	001.3319
2003021	25×13	¥570	001.3325
2003031	38×16	¥1,000	001.3338
2003041	41×19	¥1,200	001.3341
2003051	51×19	¥1,500	001.3351
2003061	64×19	¥2,000	001.3364
2003071	76×19	¥3,000	001.3376

トライアングル



容器の底をこするように回転するので固形物の溶解や、沈殿物を攪拌するのに効果的です

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2003721	20×8	¥430	001.420
2003731	25×8	¥380	001.425
2003741	25×14	¥660	001.425.14
2003751	35×9	¥590	001.435
2003761	40×14	¥720	001.440
2003771	50×12	¥810	001.450

クロスヘッド



チューブ形状の容器用に開発されました
一般的な容器でも使用できます

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2004611	8×10	¥360	001.1110
2004621	10×14	¥380	001.1114
2004631	13×17	¥500	001.1117
2004641	15×22	¥650	001.1122
2004651	12×30	¥830	001.1130
2004661	12×35	¥950	001.1135
2004671	14×40	¥1,500	001.1140

シリンダー



なめらかな仕上りのシリンダー状で広い用途でお使いになれます

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2000021	8×3	¥220	001.108
2000161	30×6	¥290	001.130
2000171	30×7	¥360	001.130.7
2000191	35×6	¥380	001.135
2000231	50×8	¥560	001.150
2000251	70×10	¥910	001.170
2000261	80×10	¥1,060	001.180

ターボ (楕円)



注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2005911	10×6	¥580	001.2610.RE
2005921	15×10	¥910	001.2615.RE
2005931	25×14	¥1,200	001.2625.RE
2005941	50×24	¥3,340	001.2650.RE
2005951	70×28	¥6,100	001.2670.RE

取り出し棒



PTFE

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2006611	150×10	¥2,510	004.150
2006621	250×10	¥3,080	004.250
2006631	350×10	¥3,490	004.350
2006641	450×10	¥4,030	004.450

クロス



非常に安定しており、いろいろな目的に使用できます

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2004511	5×10	¥420	001.2401
2004521	8×20	¥560	001.2402
2004531	9×25	¥630	001.2403
2004541	10×30	¥690	001.2404
2004551	11×38	¥860	001.2405
2004561	15×50	¥1,630	001.2406
2004571	20×60	¥2,490	001.2407

オクタゴン



ピボット リングと同様に容器の底が平らでなくカーブしている場合にご使用ください

ピボットによりバーが最適な位置に収まり、低速でも攪拌力が高まります

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2001411	13×3	¥380	001.513.3
2001421	13×8	¥210	001.513
2001441	15×8	¥300	001.515
2001451	22×8	¥370	001.522
2001481	28×8	¥440	001.528
2001521	51×8	¥530	001.551
2001531	51×10	¥660	001.551.10

マイクロ



小さな容器に入った少量サンプル用です
容器に対してできるだけ大きなサイズのものをご使用ください

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2001921	3×3	¥280	001.803
2001931	5×2	¥250	001.805
2001941	6×3	¥190	001.806
2001951	7×2	¥220	001.807
2001971	8×3	¥220	001.808.3
2001981	10×3	¥250	001.810
2002021	30×3	¥560	001.830

テーパー



底が平らでない容器に向いています

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2003311	10×4	¥230	001.1910
2003321	15×5	¥230	001.1915
2003331	20×7	¥280	001.1920
2003341	25×8	¥330	001.1925
2003351	30×8	¥360	001.1930
2003361	35×8	¥420	001.1935
2003391	50×8	¥640	001.1950

ターボ (シリンダー)



注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2006211	8×3	¥490	001.108.RE
2006221	12×4.5	¥600	001.112.RE
2006231	20×6	¥760	001.120.RE
2006261	40×8	¥1,320	001.140.RE
2006271	50×8	¥1,360	001.150.RE
2006281	60×10	¥1,730	001.160.RE

ターボ (オーバル)



注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2006011	10×5	¥450	001.610.RE
2006021	15×6	¥580	001.615.RE
2006031	20×10	¥1,230	001.620.RE
2006041	25×12	¥1,110	001.625.RE
2006051	35×16	¥1,610	001.635.RE
2006061	40×20	¥2,300	001.640.RE
2006081	64×20	¥2,940	001.664.RE

PTFE ターボ

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2006911	150×10	¥3,590	004.150.RE
2006921	250×10	¥3,730	004.250.RE
2006931	350×10	¥4,010	004.350.RE
2006941	450×10	¥4,280	004.450.RE

掲載品以外のサイズ、形状については別途ご照会下さい

バイオミックス シリーズ 細胞培養用 超低速

コントロールユニットセパレート型 **バイオミックスドライブ** + **コントロール**

超低速 5~250rpm 攪拌容量 ~5,000mℓ

- **高精度、再現性** 精度：50rpm設定時±1.0%、100rpm設定時±1.5%、200rpm設定時±2.0% 再現性：40℃時0.3%
- **コントロールはデジタル表示** バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です
- **ハイパワー…攪拌容量~5,000mℓ** 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します
- **薄型** 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所をとりません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます

水中 **CO₂インキュベーター** **薄型38mm**

薄型



	バイオミックス ドライブ1	バイオミックス ドライブ2	バイオミックス ドライブ3	バイオミックス ドライブ4	バイオミックス コントロール
注 文 コード	1005350	1005360	1005370	1005380	1005390
価 格	¥176,000	¥331,000	¥481,000	¥620,000	¥381,000
メーカーコード	80001	80002	80003	80004	98400
攪 拌 点	1	2	3	4	—
攪拌点の間隔	—	140mm	140mm	140mm	—
最大攪拌出力	6W / 攪拌点あたり				—
出 力 セ ャ ッ ト	10 ~ 100% (10段階) 4 ~ 40W				10 ~ 100% (10段階) 4 ~ 40W
ケ ー ス	ステンレス(SUS304)				ステンレス(SUS304)
使 用 環 境	- 10 ~ 50℃ (湿度 100%時) / ~ 50℃ (水中)				- 10 ~ 50℃ (湿度 80%時)
電 源	48VDC				100-240V / 50・60Hz
サ イ ズ	180 × 180 × 38mm	130 × 270 × 38mm	130 × 410 × 38mm	270 × 270 × 38mm	200 × 155 × 38mm
防 水 ・ 防 塵	IP68				IP20
重 量 (約)	2.3kg	2.5kg	3.5kg	4.7kg	1.3kg

※ご使用に際してはドライブ (またはMS4) が必要です。

コントロールユニット一体型 バイオミックス1

超低速 5~250rpm 攪拌容量 ~5,000mℓ

- 超低速でハイパワー、薄型 (38mm) のコントロールユニット一体型のスターラーです
- スピードはデジタル表示ですので確実な再現が可能です

* インキュベーター内での使用には不向きです

仕 様

外 装	ステンレス(SUS304)
サ イ ズ	180 × 230 × 38mm
重 量	約 3.3 kg
使 用 環 境	- 10 ~ 50℃ (湿度 80%時)
防水・防塵	IP64
電 源	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1.5 A

注文コード	価 格	メーカーコード
1005450	¥312,000	85001



パワーミックス L46



- バイブレーションが強力で、試験管はφ7mm～35mmまで使えます
- 振動部を押せばスイッチが入ります
- もちろん連続振動でも使えます
- 無段変速で、最高スピードは2500rpmです
- 丈夫で安定感があります
- 豊富なアクセサリが揃っています

電源：100V 消費電力：40W サイズ：135×120×135mm (L×D×H)
重量：3.2kg

基本ユニットにこれだけのアクセサリ



写真	注文コード	仕 様	価 格	メーカーコード
	0710000	基本ユニット(スタンダードカップ付)	¥77,300	46.010
A	0710010	マイクロプレートホルダー	¥14,800	46.100
B	0710020	マイクロチューブ(20本)用ポリエチレンホルダー	¥16,300	46.200
b1	0710030	スベアーポリエチレンホルダー	¥6,100	46.250
C	0710040	試験管(1本)用ホルダー	¥14,800	46.300
D	0710050	試験管マルチホルダー	¥25,800	46.400
E	0710060	ユニバーサルコンタクトプレート	¥9,300	46.500

パーツは自社製
(オランダ)

見た目に似合わないパワーと安定感

ボルテックス ミキサー V-3

キャンペーン



- 頑丈で使いやすく、信頼性の高いボルテックスミキサーです
- ドーム型で持ち運びがしやすく、振動を抑える構造です

φ 130 mm

CE



主な仕様

回転直径：4mm
回転速度：50～4000rpm
サイズ：255×305mm
電源：100-240V 50/60Hz
サイズと重量：φ130×58mm 0.7kg

注文コード	価 格	キャンペーン価格
1011800	¥55,400	→ ¥39,900

【オプション】



1.5 / 2.0 ml 9本用アダプター
(～3,000 RPM)

注文コード	価 格
1011811	¥9,900

速度を変える必要がなければ！

ミニ ボルテキサー

キャンペーン

Heathrow Scientific

コンパクトで場所を取らず、シンプルで強力なミキサーです



- 薄型で場所を取らず、コンパクトです
- 材質はABSとシリコンで、耐薬品性にも優れています
- 動作中も非常に安定しています
- 静かで振動も少ない設計です

仕様

サイズ：13 (L) × 11 (W) × 7.5 (H)
 速度：4500rpm
 回転直径：6mm
 チューブ：～ 50mℓ
 付属品：シリコンキャップ2個
 電源：100～240VAC、50-60Hz

NEW

注文コード	品名	カラー	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
0675120	ミニボルテキサー	パープル	¥30,000 → ¥21,600		120567
0675125		ブルー			120598

標準ホルダーで6種類のチューブ

ボルテキサー

キャンペーン


Heathrow Scientific



- 6サイズのチューブホルダーを標準装備しています
- ヘッドを交換する必要がありません
- 中心部のパッドでは手持ちで攪拌ができます

仕様

回転速度：0～3000rpm（無段階）
 回転直径：3.7mm
 運転方式：タッチ、連続運転切替式
 重量：3.93kg
 サイズ（mm）：171W×190D×197H

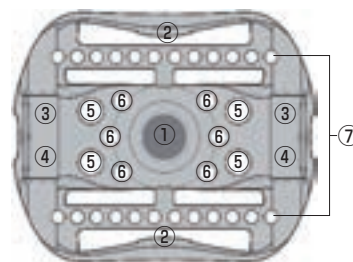

注文コード	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
0675100	¥50,100 → ¥39,900		HS120318

- ① 中央部のパッドでは手持ちで攪拌します
- ② 50mℓチューブ×2本（水平）
- ③ 15mℓチューブ×2本（水平）
- ④ 5mℓチューブ×2本（水平）
- ⑤ 1.5/2.0mℓチューブ×4本（垂直）
- ⑥ 0.5mℓチューブ×6本（垂直）
- ⑦ 0.2mℓチューブ×24本（垂直）

デジタルならではの再現性

デジタル ボルテキサー

キャンペーン

Heathrow Scientific



- デジタル制御ですので、正確で再現性の高いボルテックスが可能です
- ヘッドは様々な角度でチューブをボルテックスできるように設計されています
- 外装はABS樹脂とシリコンでできており、耐薬品性とクリーニングのしやすさを向上しています
- 頑丈なプラットフォームとエラストマー製の脚部により、動作中も安定しています


主な仕様

動作モード：タッチ式または連続運転
 回転速度：タッチ式 600～3600rpm、連続運転 600～2600rpm
 連続運転時間：0～50時間
 カウントダウンタイマー：連続運転～50時間、タッチ式～1分
 カウントアップタイマー：連続運転時のみ、50時間まで
 回転直径：5.8mm
 重量：2.4kg
 最大負荷：250g
 電源：100-240VAC 50/60Hz *日本仕様コンセント付
 適合規格：CE、UKCA、RoHS、WEEE

注文コード	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
0675110	¥119,000 → ¥75,000		120805

ドライバスインキュベーター

キャンペーン

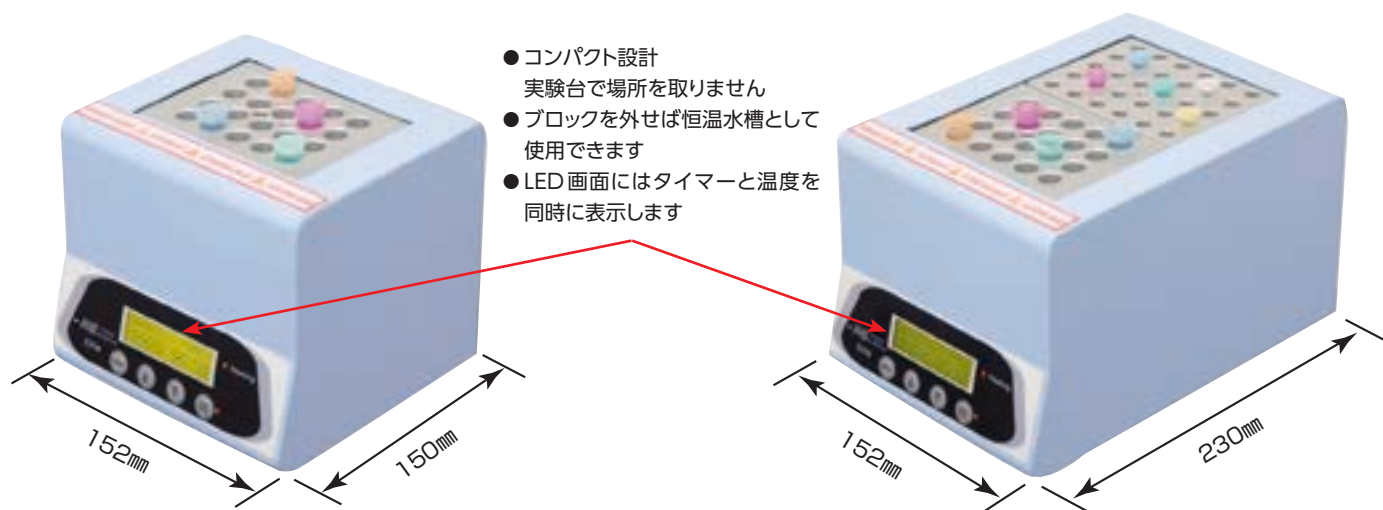

- コンパクト設計
実験台で場所を取りません
- ブロックを外せば恒温水槽として
使用できます
- LED画面にはタイマーと温度を
同時に表示します

EL-01 (シングルブロック)

注文コード	価 格	キャンペーン価格
1007000	¥124,000	→ ¥93,000

温度範囲：室温 + 5℃ ~ 150℃
 温度の均一性：± 0.2℃ (37℃時)
 温度精度：± 0.2℃ (37℃時)
 タイマー：0 ~ 99 時間 59 分

EL-02 (ダブルブロック)

注文コード	価 格	キャンペーン価格
1007001	¥144,000	→ ¥108,000

注文コード / メーカーコード	使用できるチューブ・プレート	ウェルの径	ウェルの深さ	価 格	キャンペーン価格
1007060 MD-MP01-S	平底タイタープレート (シングル用)	—	—	¥26,000	→ ¥24,000
1007061 MD-MP02-S	96 ウェルディープウェル、 PCR プレート (シングル用)	6.3mm	15mm	¥39,200	→ ¥32,700
1007062 MD-MP01-D	平底タイタープレート (ダブル用)	87 × 130mm	20mm	¥54,000	→ ¥45,000
1007063 MD-MP02-D	96 ウェルディープウェル、 PCR プレート (ダブル用)	6.3mm	15mm	¥54,000	→ ¥45,000
1007053 MD-B0.2	0.2ml チューブ 64 本 (0.2ml 8 連チューブ × 8 ストリップ)	6.3mm	17mm	¥46,400	→ ¥33,400
1007054 MD-B0.5	0.5ml チューブ 20 本	7.8mm	25mm	¥26,000	→ ¥18,700
1007050 MD-B1.5	1.5 / 2.0ml チューブ 20 本	11mm	33mm	¥26,000	→ ¥18,700
1007052 MD-B0.5 / 1.5	1.5 / 2.0ml チューブ 20 本または 0.5ml チューブ 30 本 (両面使用)	0.5ml / 7.8mm 1.5ml / 11mm	0.5ml / 25mm 1.5ml / 33mm	¥42,800	→ ¥31,300
1007051 MD-B0.5 + 1.5	1.5 / 2.0ml チューブ 12 本 0.5ml チューブ 12 本	0.5ml / 7.8mm 1.5ml / 11mm	0.5ml / 25mm 1.5ml / 33mm	¥26,000	→ ¥18,900
1007057 MD-B13	φ 13mm チューブ 20 本	13.7mm	36mm	¥35,600	→ ¥26,200
1007055 MD-B17	15ml 遠心チューブ 12 本	17.4mm	45mm	¥31,600	→ ¥23,200
1007058 MD-B20	φ 20mm チューブ 12 本	20.8mm	45mm	¥31,600	→ ¥23,200
1007059 MD-B25	φ 25mm チューブ 6 本	25.6mm	45mm	¥31,600	→ ¥23,200
1007056 MD-B29	50ml 遠心チューブ 4 本	29mm	45mm	¥31,600	→ ¥23,200

フーガミックス 3 CM-50M



- 大幅に進化した12段階のミキサー機能
- 遠心専用ローターで15000rpmの遠心
- 100rpm / 10RCF 単位の設定は同時表示




50.01

遠心専用

~15000RPM




50.02

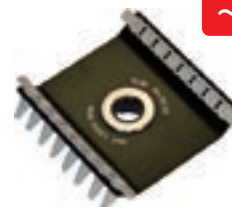

50.03

遠心+ミキサー

~12500RPM

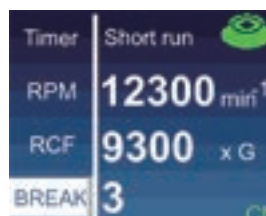

RPM/RCF 同時表示

仕様

遠心：1000～15000rpm（ローター 50.01）
1000～12500rpm（50.02 / 50.03）
ブレーキ：5段階
ミキサー：9段階
タイマー：5～59秒、1～99分
使用環境：10～40℃ 80% r.h.
重量：3.1kg
サイズ：200×180×145mm

注文コード	品名	価格
1011003	フーガミックス 3 CM-50M	¥264,000
1011011	15000rpm遠心専用ローター 50.01	¥46,200
1011012	1.5 / 2.0mlチューブ 12 本用ローター 50.02	¥22,400
1011013	0.2mlチューブ 16 本用ローター 50.03	¥15,500
1011020	0.5 mlチューブ用アダプター	¥7,100
1011021	0.2 mlチューブ用アダプター	¥7,100

ミキサー+スピンドウン 混ぜてスピンドウンを自動で

ミキサー機能付遠心機 CM-70M-07



- スピンとミックスを繰り返し、スピンドウンして終わるプログラム付
- 標準ローターには0.2ml、1.5ml、0.5ml、各12本が同時にかかります
- チューブの種類が変わってもローターを交換する必要がありません

仕様

1000～7000rpm
(～3200 xG)
1000rpm毎にセット
ミキサー：6段階
タイマー：0.1～30分
使用環境：10～45℃ 80% r.h.
サイズ：190×170×125mm
重量：1.5kg
最大：3200xg

注文コード	品名	価格
1011400	ミキサー機能付遠心機 CM-70M-07	¥190,000
1011412	0.2mlチューブ 16 本用ローター	¥9,000

コンパクトサイズで 最高速16000 rpm

遠心機 CM-50 Pro



NEW



【主な特長】

- 通常の遠心機能に加え、11種類のプログラムをカスタマイズすることができます
- タッチスクリーンは使いやすく直感的に操作することができます
- コンパクトで場所を取らず、電源アダプターも内蔵しました
- 加速性能が向上し、16000rpmのハイパフォーマンスを実現します

【主な機能と仕様】

プログラム：11通りカスタム可
遠心速度：800～16000rpm
最大遠心力：17,400xG
タイマー：1秒～99分
許容インバランス：2g
消費電力：70W
サイズ：W204×L180×H137mm

注文コード	品名	価格
1011200	遠心機 CM-50Pro	¥259,000
1011011	ローター 50.01	¥46,200

15ml 50ml プレートスピンドウン

遠心機 スカイスピン CM-7S Plus



より見やすく、操作しやすくなったインターフェース

- 15mlチューブ、50mlチューブ、プレートの遠心ができます
- 内部はステンレス製です
- リッドは透明で中を見ることができ、また自動でロックされます
- 最高3500rpmまでの遠心が可能で、素早く加速やブレーキを行います
- 表示は見やすく、操作方法も簡単です

主な仕様

回転速度：100-3500rpm
タイマー：1分～12時間
最大遠心力：2300rcf
ブレーキレベル：6段階
使用環境：10～40℃、～20℃時80% r.h.
サイズ：W430×W415×H220mm
重量：13.8kg

15ml 50ml プレート

ローター各種(別売)



注文コード：1011301

価格：¥307,000

メーカーコード：CM-7S Plus



注文コード：1011310
12mlチューブ×12本

¥18,600




注文コード：1011315
15mlチューブ×12本

¥53,400



注文コード：1011311
50mlチューブ×4本

¥33,900

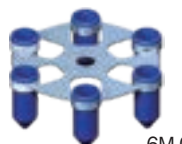

注文コード：1011316
50mlチューブ×6本

¥50,100 **NEW**



注文コード：1011312
12ml×12本 + 15ml×12

¥69,300



注文コード：1011314
プレート×2枚

¥52,900

スプラウト plus

キャンペーン

Heathrow Scientific



- 工具が必要なく簡単にローターを交換することができます
- 人間工学に基づいて、手のひらに収まりやすいリッドのデザインです
- 種類を問わず8連チューブもスピンドウすることができます
- 本体はABS製、リッドはポリカーボネイト製で、クリーニングしやすい材質です

主な仕様

遠心速度：6000rpm 固定式

遠心力：2000×g

付属：1.5/2.0ml×6本用ローター

0.2ml 8連チューブ×2 ストリップ用ローター

0.2ml用アダプター×6 0.5ml用アダプター×6

予備O-リング、ローターケース、チューブラック

注文コード	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
0675003	¥50,100	→ ¥39,900	HS120610

ショートランでもタイマーでも、2つのモードでスピンドウ

PCRプレート用遠心機 MS-MC

キャンペーン

MS major science



NEW



【主な特長】

- シンプルで取り扱いも簡単です
- リッドは95°開きますのでプレート出し入れが簡単です
- スカートの有無を問わず、様々なタイプのPCRプレートに対応します
- ショートランとタイマーでの運転、2つのモードがあります

【主な機能と仕様】

タイマー：～99分/99秒

遠心速度：500～3000rpm

最大遠心力：500×g

ブレーキ：20±5秒

消費電力：45W

サイズ：W220×L245×H200mm

重量：2.5kg

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
1007800	PCRプレート遠心機 MS-MC	¥120,000	→ ¥84,000

デジタルシェーカー DOS-20-S

キャンペーン



マグネットクリップで
自由自在に容器を固定



- 設置場所を選ばない非常にコンパクトなベンチトップシェーカーです
- 回転直径は20mmで、しっかりとした攪拌を行います
- 付属のマグネットクリップ（3個）で自由に容器を設置することができます

主な仕様

回転直径：20mm
 回転速度：45～250rpm
 天板サイズ：168×168mm
 タイマー：1～999分
 使用環境：+4～45℃、20℃時湿度80%
 電源：100-240V 50/60Hz
 サイズと重量：205×170×70mm 1.4kg

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
1011550	デジタルシェーカー DOS-20-S	¥167,000	→ ¥133,000

マイクロプレート、ELISAプレート、ディープウェルプレートにも対応

プレートシェーカー MS-MPS

キャンペーン



【主な特長】

- 精度の高いブラシレスモーターで、静かで長期間安定してお使いになれます
- LEDデジタルディスプレイで直感的に速度、タイマーを設定することができます
- マイクロプレート、ELISAプレート、ディープウェルプレートでもお使いになれます

【主な機能と仕様】

プレート数：4枚
 回転速度：200～1500rpm
 回転直径：3mm
 タイマー：1分～99時間59分
 消費電力：80W
 電源：100-240V、50/60Hz
 サイズ：W210×L340×H145mm
 重量：5kg

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
1007900	プレートシェーカー MS-MPS	¥120,000	→ ¥106,000

デジタル ロッキング シェーカー DRS-12



- 両端に1kg、中央には5kgを搭載することができる強力なシェーカーです
- 安定したシーソー式で、オプションで2段式にすることが可能です

主な仕様

振とう角度：1～12°
 振とう速度：毎分1～50回
 天板サイズ：255×305mm
 タイマー：1～999分
 使用環境：+4～45℃、20℃時湿度80%
 電源：100-240V 50/60Hz
 サイズと重量：305×275×110mm 3.5kg

注文コード	品名	価格
1011700	デジタルロッキングシェーカー DRS-12	¥210,000
1011781	マルチレベルプラットフォーム	¥17,000

インテリミキサー RM-2M

キャンペーン

24種のプログラム
ウェスタンブロッティング
3種のカスタムモード

- チューブのサイズや用途によって、8種類のラックをいつでも交換できます
ラックはすべて別売りです。ご用途に合ったものをお選びください
- F1～F9の標準プログラム、2段階の振幅のボルテックス、9段階の角度のシーソー式の動きのほか、3種類のカスタムプログラムを作成することができます
- 1～99rpmの回転速度を設定できます
- 低温（2℃）で使用できます



上下ボタンで簡単に動作を選択



注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
1011910	インテリミキサー RM-2M	¥158,000	→¥126,000




プロッターとして



ロッキングミキサーとして



ローテーターとボルテックス

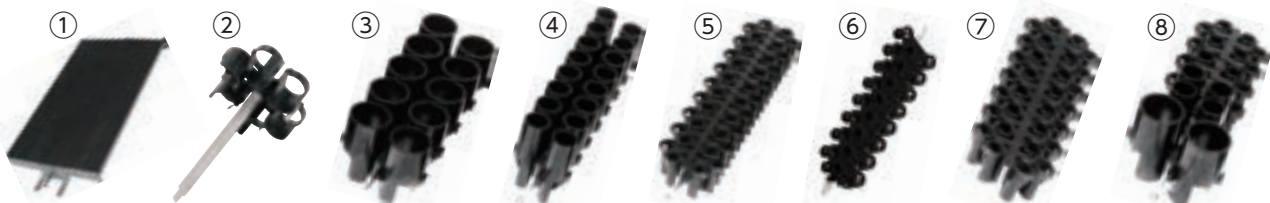


注文コード	品名 / チューブ本数	価格	注文コード	品名 / チューブ本数	価格
① 1011973	ロッキングプラットフォーム	¥19,900	⑤ 1011968	φ 13mmラック(クライオバイアル×28本)	¥12,200
② 1011972	プロットングラック(50ml×6本)	¥17,000	⑥ 1011969	φ 11mmラック(1.5/2.0ml×32本)	¥12,200
③ 1011966	φ 30mmラック(50ml×10本)	¥14,400	⑦ 1011970	φ 8mmラック(0.5ml×30本)	¥12,200
④ 1011967	φ 16mmラック(15ml×14本)	¥15,100	⑧ 1011971	ミックスラック(※下記をご参照ください)	¥16,400

※ミックスラックには φ11 mm×8本、φ13 mm×8本、φ16 mm×4本、φ30 mm×2本のチューブが取り付けられます

ブルービュー トランスイルミネーター (波長 470 nm)

キャンペーン

MS major science

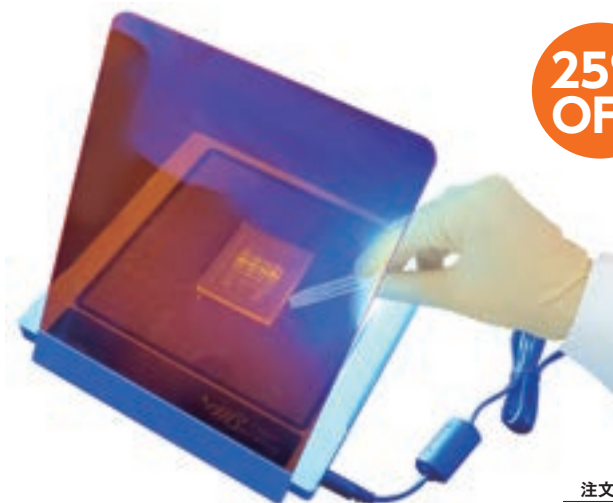

25%
OFF

MBE-200A

- コンパクト (200×200×13.9mm) … 本体のみ
- 軽量 (760g) … 本体のみ
- 観察用のアンバーフィルター、簡易的なフードが付属されます
- 観察エリア: 153mm×153mm

【使用例】ゲルを載せ、アンバーフィルター (標準付属品) を通して切り出し




【使用例】簡易的なフード (標準付属品)、スマホで撮影

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
1007610	ブルービュートランスイルミネーター (波長 470nm)	¥75,600	→ ¥56,700	MBE-200A

MBE-300 (波長 470nm)

- 泳動槽の下に直接置けるタイプのLED イルミネーターです
- コンパクト (86×170×25mm)
- 観察用のアンバーフィルターが付属されます
- 観察エリア: 112×74.6mm

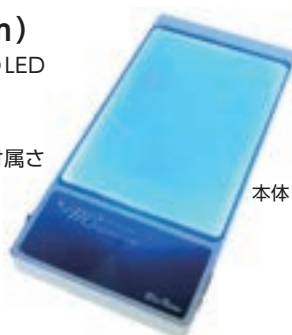

本体

MJ-105A+MBE-300



使用例

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
1007630	MBE-300 (波長 470nm)	¥74,400	→ ¥55,800	MBE-300

水平式電気泳動装置 MJ-105A

キャンペーン

MS major science



セットに含まれるもの

- タンク、リッド 各1
- ゲル作成スタンド MJ-G01×2
- トレイ MJ-T02 (107×60mm) ×2
- トレイ MJ-T01 (52×60mm) ×4
- 黒・赤電気泳動用ケーブル 各1本

- コーム MJ-C01×1
片 面: 8サンプル×2カ所、17サンプル×1カ所
反対面: 12サンプル×2カ所、25サンプル×1カ所
- コーム MT-C03×1
片 面: 23サンプル×1カ所、プレップ×1カ所、
マーカー×2カ所
反対面: ミニゲル用6サンプル×2カ所、
ミディゲル用12サンプル×1カ所

- アガロースゲルのキャストがしやすく、サンプルのローディングもしやすいシステムです
- 一体成型ですのでひび割れや漏れを防ぎやすく、頑丈なポリカーボネイト製ですので130℃までの温度に耐えられます
- 泳動中の電氣的な危険性を防ぐため、連結力バーが採用されています

ハンディー パワーサプライ MP-100

- 電圧は50Vもしくは100Vの2種類から選択します
- 軽量のハンディータイプ、価格も手ごろです



【主な仕様】

出力電圧: 50Vもしくは100V
出力電流: 400mA
電力: 40W
出力タイプ: 一定電圧
動作環境: 4～40℃
外寸: 60×40×120mm
材質: ポリカーボネイト
重量: 約0.3kg
電源: 100～120V

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
1007500	水平式電気泳動装置 MJ-105A	¥69,200	→ ¥51,900

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
1007550	ハンディーパワーサプライ MP-100	¥28,800	→ ¥21,600

デュアル LED トランスイルミネーター

キャンペーン

MS major science


NEW



- デュアルLED、パワフルで安全な470nmのブルーLEDと全波長の白色LEDの組み合わせで、実験結果を直接観察することができます
- ライフサイエンスのさまざまな領域で、快適、簡便、安全に核酸、たんぱくやX線フィルムをリアルタイムに観察することができます
- 本体の両面にそれぞれの光源を配置しており、裏返すだけでブルーと白色が切り替わります
- 非常に均一に光を放ちます
- 観察領域のサイズは153×153mmで、スモール/ミディアムサイズのゲルがフィットします
- 電源ON/OFFスイッチのほか、自動シャットダウン機能も備えており、また本体を裏返すと自動的にブルー/白色LEDが切り替わります
- 持ち運びに便利、軽量です(935.5g)
- アルミ合金フレームの洗練されたデザインです
- 発熱が少なく、省電力の製品です
- 簡易フード、アンバーフィルター付属




裏返すだけでブルー / 白色を切り替えることができます

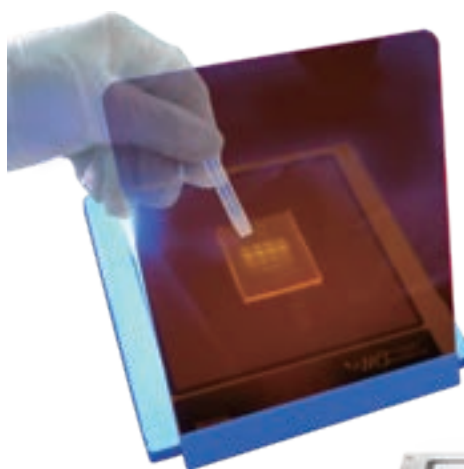

仕様

サイズ (W×L×H) : 200×200×15.6mm
 観察エリア (W×L) : 153×153mm
 基本設計 : フラットベッド
 波長 (ブルー LED) : 470nm
 波長 (白色 LED) : 全波長
 自動シャットダウン : 約6分後
 材質 : アルミ合金
 電源 : DC 12V、2A
 重量 : 935.5g

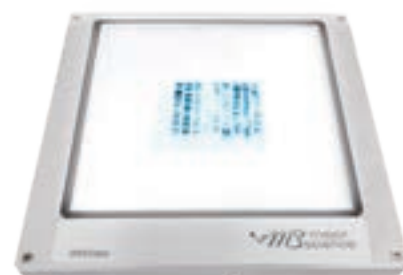35%
OFF

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
1007620	デュアルLEDトランスイルミネーター MBE-200BW	¥140,000	→ ¥90,900

シーナゲル アガロースの協力剤 低コストで低分子DNAを分離

キャンペーン



DIVERSIFIED BIOTECH

- 50～2000bpのDNA分子を分離
- 1%のシーナゲルは2%のアガロースに相当
- テーリングやスミアリングを少なくします
- ゲルの透明度が増しきれいな写真が撮れます
- 丈夫で柔軟性のあるバイナリーゲルができます
- コスト軽減効果もあります
- アガロースと混ぜてボイルするだけ

30%
OFF

SAMPLE

注文コード	容量	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
0762000	100g	¥22,500	→ ¥15,700	SYN-100

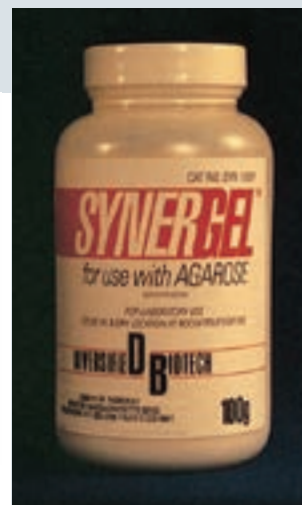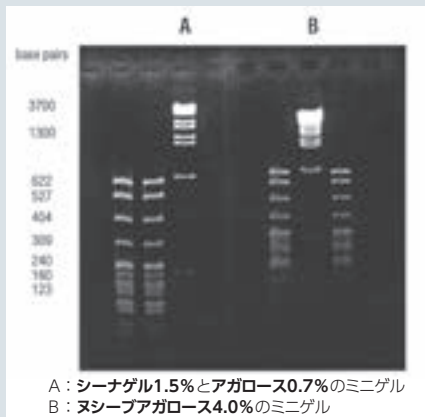

厚さ0.22mmのラボ用プラスチックカミソリ

スマート スライサー

Heathrow Scientific

- 光源の表面を傷つけることなく、直接置いたアガロースゲルをきれいにスライスします
- 柔らかい細胞や植物を切るのに便利です
- はさみで切ればサイズも調節できます
- アメリカの食品グレードのPET製
- 100枚入、2サイズ

SAMPLE

注文コード	品名	サイズ	価格	メーカーコード
0675050	スマートスライサー スモール	19 mm H × 38 mm W	¥5,900	HS120259
0675051	スマートスライサー ラージ	25 mm H × 50 mm W	¥6,900	HS120260



ゲル ドライイング フレーム

DIVERSIFIED BIOTECH

一晩立てておくだけでゲルが乾きます

- ゲルがそったり、ひび割れたりしません
- 他の乾燥用装置は一切必要としません
- ゲルを2枚のセロファンで挟んで素早く簡単に乾燥
- 24×24cmと14×14cmの2種類あります

注文コード	サイズ (cm)	入数	価格	メーカーコード
0763700	ゲルドライイングフレーム 14 × 14 cm	2 セット	¥47,200	AB-110760
0763710	ゲルドライイングフレーム 24 × 24 cm	2 セット	¥64,300	AB-110761
0763720	セロファン 14 × 14 cm フレーム用	50 枚	¥6,000	AB-110762
0763730	セロファン 24 × 24 cm フレーム用	50 枚	¥8,500	AB-110763

備考: ゲル ドライイング フレームにはセロファンが50枚ついています



スマート バッファー 純水に溶かすだけで準備完了



- 正確に秤量されたタブレットかパウチ
- pHがセットされています（25℃時）
- ハイグレードの化学物質を使用しています
- ロットごとの再現性が保証されています
- 室温で3年以上保管できます

使用方法

タブレットまたはパウチ当たりのバッファー量の80%程度の純水をビーカーかフラスコに入れ、マグネチックスターラーで攪拌して溶解します。バッファーが透明になったら所定のバッファー量になるまで更に純水を加えて攪拌すれば5分ほどで出来上がり、すぐにお使いになれます。

時間の節約

再現性確保

緊急時に備えて



PBS バッファー タブレット 100ml / 錠 φ12mm pH7.4

成分：0.14M Sodiumchloride / 0.0027M Potassiumchloride / 0.01M Phosphate

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000020	PBS 100ml	100 錠	¥9,000	09-2051-100

サンプル
準備しました



PBS バッファー タブレット 500ml / 錠 φ25mm pH7.4

成分：0.14M Sodiumchloride / 0.0027M Potassiumchloride / 0.01M Phosphate

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000060	PBS 500ml	100 錠	¥32,600	09-8912-100



PBS バッファー タブレット 1000ml / 錠 φ28mm pH7.4

成分：0.14M Sodiumchloride / 0.0027M Potassiumchloride / 0.01M Phosphate

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000070	PBS 1000ml	10 錠 (ブリスターパック)	¥11,600	09-9400-10
5000080	PBS 1000ml	100 錠 (バルク)	¥56,000	09-9400-100



PBS 10× パウダーパウチ 1000ml pH7.4

成分：1.4M Sodiumchloride / 0.027M Potassiumchloride / 0.1M Phosphate

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000125	PBS 10 × 1000ml	5 パウチ	¥17,200	12-9423-5



サンプル
準備しました



その他 PBS バッファー タブレット

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000260	PBS without Potassium 1000ml	100 錠	¥56,000	09-9420-100

成分：0.15M Sodiumchloride / 0.01M Phosphate
1000ml / 錠 φ 28mm pH 7.4

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000100	PBS 1000ml pH 7.2	100 錠	¥56,000	09-9499-100

成分：0.14M Sodiumchloride / 0.0027M Potassiumchloride / 0.01M Phosphate
1000ml / 錠 φ 28mm pH 7.2

PBS-Tween バッファー タブレット 500ml / 錠 φ 25mm 1000ml / 錠 φ 28mm pH 7.4

成分：0.14M Sodiumchloride / 0.0027M Potassiumchloride / 0.05% Tween / 0.01M Phosphate

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000320	PBS-Tween 500ml	100 錠 (バルク)	¥42,200	09-8902-100
5000340	PBS-Tween 1000ml	100 錠 (バルク)	¥64,000	09-9410-100
5000315	PBS-Tween 500ml	12 錠 (ブリストアパック)	¥9,800	09-8902-12
5000335	PBS-Tween 1000ml	10 錠 (ブリストアパック)	¥12,600	09-9410-10

TBS バッファー タブレット 500ml / 錠 φ 25mm pH 7.6

成分：0.05M TrisBufferedSaline / 0.15M Sodiumchloride

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5001050	TBS 500ml	10 錠 (ブリストアパック)	¥10,200	09-7500-10

TBS-Tween バッファー タブレット 500ml / 錠 φ 25mm pH 7.6

成分：0.05M TrisBufferedSaline / 0.05% Tween20 / 0.15M NaCl

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5001080	TBS-Tween 500ml	100 錠 (バルク)	¥65,300	09-7510-100
5001070	TBS-Tween 500ml	10 錠 (ブリストアパック)	¥14,700	09-7510-10

Carbonate-bicarbonate コーティング バッファー タブレット

100ml / 錠 φ 12mm pH 9.6

成分：0.05M Sodium Carbonate-bicarbonate

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000300	Carbonate-bicarbonate コーティングバッファー	100 錠	¥18,500	09-8922-100

puriSorb®

(ピューリソープ)

サンプルを溶解したら、ステップはわずかこれだけ

サンプル溶解液を
puriSorbへ

3分間
インキュベート

700xg
1分間遠心


- 不要な物質をpuriSorb®にバインドします
- DNAはpuriSorb®を通過し、コレクションチューブ／プレートへ
- 抽出されたDNAは、一般的な酵素反応に
制限酵素反応、PCR、リアルタイムPCR、KASP-PCR、ジェノタイピングなど
- puriColumn（ピューリカラム）もpuriPlate 96（ピューリプレート96）も、
特別な実験機器は不要です
- puriPlate 96でさらにハイスループットに、オートメーションにも組み込むことができます
- ステップが少ないため廃棄物も少なく、環境負荷を減らすこともできます



※必要な試薬、消耗品はすべてキットに含まれています

注文コード	puriColumn	サンプル数	価格	メーカーコード	主な対象サンプル(puriPlate 96 共通)
4w02010	組織のゲノム DNA	10	¥4,900	4w02.010	組織・スワブ・昆虫・マウステール・ 魚の組織・毛髪・精子・血液
4w02050		50	¥22,000	4w02.050	
4w02250		50 × 5	¥100,000	4w02.250	
4w03010	バクテリアのゲノム DNA	10	¥4,900	4w03.010	グラム陽性菌・グラム陰性菌
4w03050		50	¥22,000	4w03.050	
4w03250		50 × 5	¥100,000	4w03.250	
4w01010	植物のゲノム DNA	10	¥4,900	4w01.010	植物の葉・葉の組織・種子
4w01050		50	¥22,000	4w01.050	
4w01250		50 × 5	¥100,000	4w01.250	

注文コード	puriPlate	サンプル数	価格	メーカーコード
4w02P01	組織のゲノム DNA	96 × 1	¥38,000	4w02.P01
4w02P04		96 × 4	¥150,000	4w02.P04
4w02P10		96 × 10	¥372,000	4w02.P10
4w03P01	バクテリアのゲノム DNA	96 × 1	¥38,000	4w03.P01
4w03P04		96 × 4	¥150,000	4w03.P04
4w03P10		96 × 10	¥372,000	4w03.P10
4w01P01	植物のゲノム DNA	96 × 1	¥38,000	4w01.P01
4w01P04		96 × 4	¥150,000	4w01.P04
4w01P10		96 × 10	¥372,000	4w01.P10

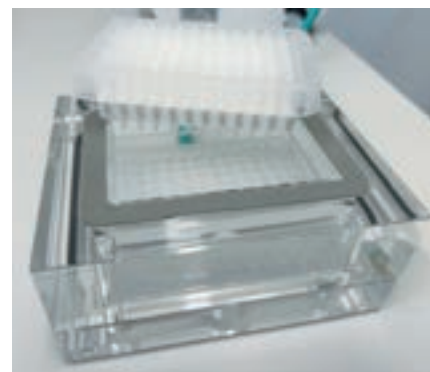

遠心もしくはバキュームでワンステップ精製

株式会社 **TOHO**

〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-1-13
e-mail : sales@j-toho-kk.co.jp
ホームページ : <https://www.j-toho-kk.co.jp>
TEL.03-3654-6611 (代表)
FAX.03-3654-0294

お問い合わせは



株式会社 新興精機

本社
北九州、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島、大阪、名古屋、東京

※このカタログに掲載されている商品は専門知識をもって研究をされている研究者の方々を対象としており、これらの方々がその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない方には使用ができません。相当の危険が伴う場合もあります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。

カタログ中の価格は令和8年6月現在のもので予告なく変更する場合があります。また価格には消費税は含まれておりません。

※大幅な為替変動などにより、キャンペーンを中止、もしくはキャンペーン価格を改訂させて頂く場合がございます。予めご了承下さい。